

機械器具55 医療用洗浄器
一般医療機器 内視鏡下灌流・吸引器

コード 70465000

JSSサクションイリゲーション

再使用禁止

JUCF0010


【禁忌・禁止】

使用方法
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

全体図（代表例：排煙機能付き）

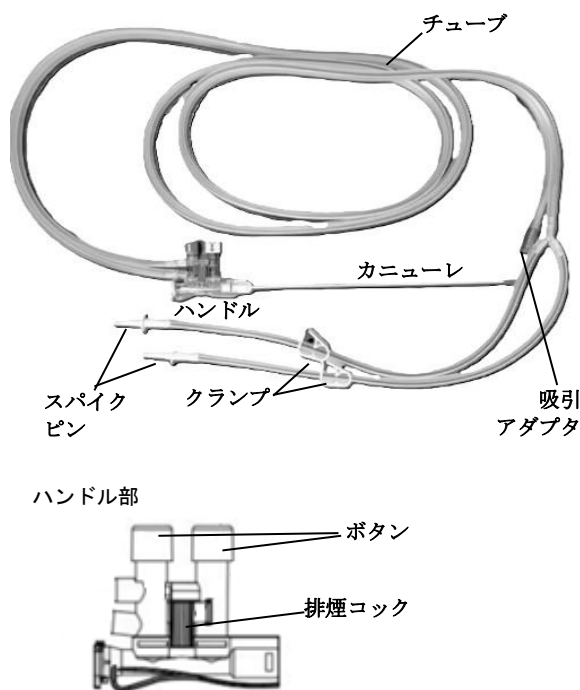

2. 原材料

カニューレ：ステンレス鋼、ABS樹脂

ハンドル：ポリカーボネート

チューブ：ポリ塩化ビニル（フタル酸フリー）、ポリカーボネート

3. 原理

灌流した生理食塩水等で術野を洗浄した後、洗浄後の生理食塩水等を吸引して廃棄する。また、術野から血液及び組織片を除去し、内視鏡下手術において視野を確保する。さらに、排煙機能付きの製品は排煙コックによって排煙を調整することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡下手術において視野確保のために術野の洗浄を行うための灌流・吸引機能をもつ機器である。本品は滅菌済み製品である。

【使用方法等】

- 滅菌バッグに異常がないことを確認して、本品を滅菌バッグから取り出す。
- カニューレをハンドルにカチッと音がするまで差し込んで接続し、カニューレ保護キャップを取り外す。
- 灌流バッグ（本申請外）に接続する前に、クランプを2つとも閉じる。
- 灌流チューブ先端のスパイクピンからスパイクピン保護キャップを取外し、灌流バッグにスパイクピンを接続する。
- 吸引アダプタを吸引ポンプ（本申請外）に接続する。
- カニューレをトロカカーシース（本申請外）に挿入する。

- 白色の吸引ボタンを押して生理食塩水等を吸引する。
- 使用する灌流バッグに接続している側のクランプを開いて、青色の灌流ボタンを押して生理食塩水等を灌流し術野を洗浄する。
- 吸引力はボタンの押下の強さによって調節できるが、排煙機能付きの製品では排煙コックでも調整できる。排煙コックを完全にON側にすると吸引力が最大になり、排煙コックを完全にOFF側にすると、吸引は停止する。
- 処置を終了した後、クランプを2つとも閉じる。
- 吸引アダプタを吸引ポンプから取り外す。
- カニューレをトロカカーシースから抜去する。

【使用上の注意】

- カニューレは金属製のため、通電している他の医療機器と接触しないように注意すること。【患者及び術者に感電、熱傷】
- 外部機器との接続が完全であることを確認すること。【接続が不十分な場合、汚染、液漏れなどのおそれがあるため。】
- 排煙機能を使用しないときは、必ず排煙コックを完全にOFFにすること。【ガスの減少によって視野が狭くなる、またはガスの過剰な供給による患者の傷害】
- 排煙機能を使用する場合は0.04 MPaの設定とすること。
- 本品の取扱いには十分注意し、落としたり、ぶつけたり、重いものをのせたり、過度な力を加えたりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- 水濡れに注意し、直射日光を避けて湿度が80%以下のよく換気された、ガス等の影響がない清潔な屋内で保存すること。

[有効期間]

- 包装の使用期限欄を参照[自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス

大阪市中央区道修町1-6-7 TEL：06-6222-3751

■外国製造業者

Unimicro Medical Systems (Shenzhen) 社

中華人民共和国

株式会社ジェイエスエス