

機械器具 16 体温計

管理医療機器 電子体温計 (JMDN コード: 14032010)

シチズン 電子体温計 CTEB503L




【警告】

- ・電池はお子様の手が届かない所に置いてください。
- ・お子様だけで使わせないでください。
- ・測温部をかまないでください。

[本製品の先端部をかみ切って飲み込んだり、けがをする可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 各部のなまえ

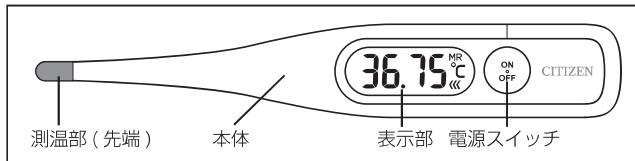

- * 付属品: 収納ケース、モニター用電池(内蔵)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC 技術資料、サポートリング (2個)

2. 体に接触する部分の原材料

- ・測温部: SUS 304 ステンレススチール
- ・本 体: ABS 樹脂 (抗菌剤使用)
- ・サポートリング: シリコンゴム (抗菌剤使用)

3. 本体の寸法および重量

- * 本体: 約 20mm (幅) × 125mm (長さ) × 12.5mm (厚さ)
・質量: 約 15g (電池含む)

4. 電気的定格

- ・電源: DC1.5V (LR41 × 1 個)
- ・消費電力: 約 1.5mW
- ・分類: 内部電源機器・B F 形装着部・IPX7

※ IPX7 とは、IEC60529 によって規定された水に対する保護を示しており、1m の深さに 30 分間浸漬させても有害な影響を生じる量の水が製品内に侵入されないように保護されています。

5. 原理

本製品は、人の体温を測定するための装置であり、測温部、本体、電源スイッチ、表示部等からなり、測温部に伝わった温度を感温素子により電気量に変換し、その電気量を LSI により演算処理し、平衡温を予測した後、測定値をデジタル表示するものです。


【使用目的又は効果】

本製品は、測温部を部位に接触させて、腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する装置です。

【使用方法等】

- (1) 電源スイッチを押して電源を入れます。
(バックライトが 4 秒間点灯します。)
- (2) 「ピッ」とブザーが鳴り、全点灯表示に続いて、前回の検温値が表示され、単位マーク「℃」が点滅して、測定状態になります。
- (3) 測温部を舌下に密着させ、測定します。

- ① あらかじめサポートリングを本体にとりつけます。
- ② 測温部 (先端) を舌下のつけ根の左右のどちらかにあてます。
- ③ 舌で体温計をおさえて、口を軽く閉じます。
- ④ 体温計がずれないように手で支えます。

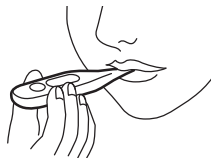

- (4) 予測検温の場合:
検温開始後、約 30 秒で予測検温終了のブザー (連続 3 回) が鳴りますので、予測検温を確認し、電源スイッチを押して電源を切ります。(予測検温終了時にバックライトが点灯します。)
※正しい方法で測定をおこなわなかった場合や血行動態・体躯等によっては予測精度が保証されない可能性がありますのでご注意ください。

(5) 実測検温の場合:

- ① 実測検温をおこなう場合は、予測検温終了のブザーが鳴っても、体温計を口中から出さず、そのまま検温を続けます。検温開始から約 90 秒後に実測表示に切り替わります。
- ② その後もそのまま検温を続けると、検温開始から約 5 分経過後に、実測検温終了のブザー (連続 5 回) が鳴りますので、その時点の実測検温値を確認します。(実測検温終了時にバックライトが点灯します。)
※ 婦人用体温計は実測検温することが望ましいといわれています。

(6) 検温が終了したら電源スイッチを押して電源を切ります。

(7) ご使用後は乾いた布等で水気を拭き取って、清潔な状態で付属の収納ケースに戻してください。

(8) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

- (1) 口中専用です。口中以外で検温しないでください。
- (2) 基礎体温は必ず舌下中央で測定してください。
- (3) 舌下温は腋下温より 0.2℃～0.5℃高いといわれています。
体温測定は同一部位で一定時間検温してください。
- (4) 運動、入浴、食事のあとの約 30 分間は検温を避けてください。
- (5) 周囲温度が 32℃以上の場合、測温部を水で冷やしてから測定し、周囲温度の影響を受ける前にすばやく表示をお読みください。
- (6) 人の体温以外の測定には使用しないでください。
- (7) 修理、改造、分解は絶対におこなわないでください。
- (8) 超音波洗浄はしないでください。[故障の原因になります]
- (9) 水中に放置したり、水道の蛇口に直接あてないでください。
- (10) 曲げたり落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- * (11) 電池、電池カバー、サポートリングなどお様が飲み込まないように充分注意してください。誤って電池、電池カバーなどを飲み込んでしまった場合、あるいは飲み込んだおそれがある場合は、医師に連絡し、指示を受けてください。
- ※ 添付文書および取扱説明書に従わない使用がなされた場合および勝手に何らかの修理、改造、分解、再調整がなされた場合について、製造販売業者は一切の責任を負うことができませんのでご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温や直射日光が当たる場所、湿気が強い場所、ほこりが多い場所、腐食性のガスが発生する場所に保管しないでください。
長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

2. 耐用期間

標準的な耐用期間の目安: 5 年 [自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

- (1) 測温部 (先端) を消毒する場合には、消毒用アルコールを含ませたガーゼ等で軽く拭いてください。また、測温部を長時間アルコールに浸漬したり、熱湯 (50℃を超えるお湯) で消毒しないでください。
- (2) 汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で汚れを落とした後、洗剤をよく拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム等は絶対に使わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: シチズン・システムズ株式会社

製 造 元: 西鉄城精電科技 (江門) 有限公司

CITIZEN SYSTEMS (JIANGMEN) CO., LTD.

中華人民共和国

お問い合わせ先

シチズン・システムズ株式会社 お客様相談室

〒188-8511 東京都西東京市田無町 6-1-12

電話: 0120-88-6295

取扱説明書を必ずご参照ください