


デジタルセンサーポジショニングキット

*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

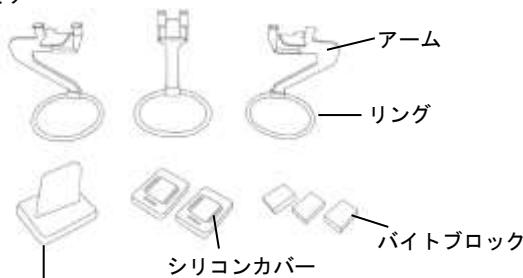

バイトウィングシリコンセンサーカバー

2. 原材料

アーム、リング：MPP0(変性ポリフェニレンオキシド)
シリコンカバー、バイトウィングシリコンセンサーカバー、
バイトブロック：シリコン

3. 包装

アーム（ライト、レフト、センター） 各 1 個
リング： 3 個
シリコンカバー： 2 個
バイトウィングシリコンセンサーカバー： 1 個
バイトブロック： 3 個

ケース


【使用目的又は効果】

本品は歯科用デジタル X 線撮影（デンタルセンサー）時に、歯科用デンタルセンサーをシリコンカバーに挟み、患者の口腔内に挿入することにより、センサーを適切な位置に支持及び配置するために用いる。


【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 使用前に本品が滅菌済みかどうか確認する。（オートクレーブ滅菌可。121℃以下厳守。乾燥工程及びケミクレーブ不可。）
- 2) リング接続口の凸部が上に向けた状態でリングをアームに接続する。

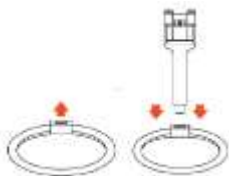

- 3) アームにバイトブロック、シリコンカバーにデンタルセンサーを挟み込み、アームにセットする。

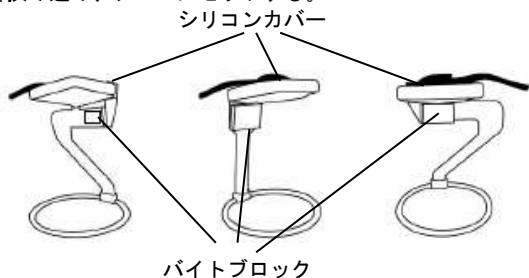

- 4) 確実に撮影位置に本品が固定されたことを確認後、通法に従い撮影を開始する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品は患者の口腔内に挿入して使用するので、口腔粘膜等を傷つけないように注意すること。
- ・無理な角度や過度な加圧での使用は避けること。
- ・本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
 - 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
 - 3) 洗浄・滅菌上の注意
- 【洗浄】
- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
 - ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
 - ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 【滅菌】
- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、121℃以下厳守。乾燥工程及びケミクレーブ不可。】
- 【その他】
- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
 - ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：DXM Co., Ltd.（ディーエックスエム社）
製造国：大韓民国