

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN コード：16350000

## リムロックトレーAA


### \*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

下記のとおり

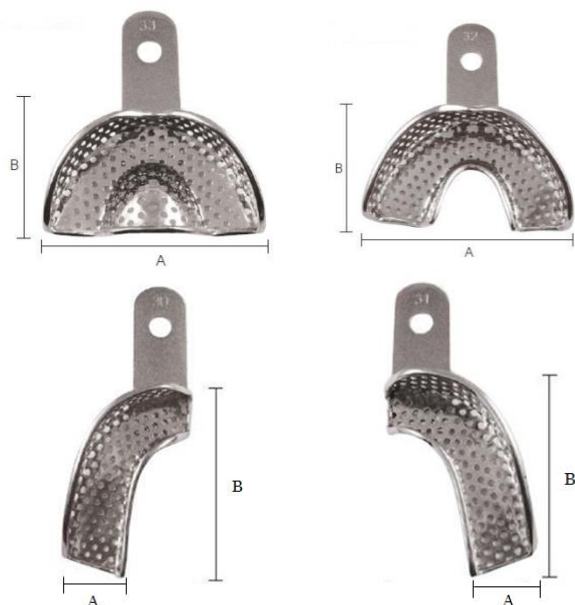

|       | 幅 (A) | 高さ (B) |
|-------|-------|--------|
| 上顎前歯用 | 62.5  | 37     |
| 下顎前歯用 | 65    | 37     |
| 左上右下  | 19.8  | 60     |
| 右上左下  | 19.8  | 60     |

(サイズ単位：mm/公差±4 mm)

#### 2. 原材料

ステンレススチール

#### 3. 包装

各 1 個 / 包

### 【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- 1) 使用する前に本品が減菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守）
- 2) 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯牙に圧接する。
- 3) 印象材の硬化後、口腔内から取り出す。
- 4) 使用後は必ず使用上の注意に従い、洗浄、滅菌を行うこと。

### 【使用上の注意】

- (1) 使用前または使用後に、下記事項に留意して、必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
  - ①オートクレーブ使用の際は、必ず滅菌バッグに入れ、乾燥工程を含む 134℃以下で行うこと。（ステンレストレー等）に、直に置いて滅菌すると、変色の恐れがある）
  - ②滅菌の際、以下の薬剤は金属腐食の原因になる恐れがある為、使用しないこと。（塩化ベンザルニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポピドヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロロヘキシジン）
  - ③洗浄・消毒・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
  - ④洗浄・消毒・滅菌は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着しているとシミや変性などの原因になることがある。
  - ⑤洗浄後、洗剤が残らないように十分すすぐこと。
  - ⑥磨き粉、金属ウールや金ブラシの使用は避けること。
  - ⑦トレークリーナー、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って使用すること。トレークリーナーによっては、黒ずんだり、本品の損傷を早める恐れがあるため、長時間の浸漬を必要とするもの（一晩や一昼夜等）は使用しないこと。
  - ⑧アルカリ性や酸性の水溶液（洗浄液等）に反応し変色する恐れがある為、中性のものを使用すること。
  - ⑨塩素系および、ヨウ素系消毒剤は腐食の原因となるので、使用中に付着した場合は、できるだけ早めに洗浄を行う。
  - ⑩印象材の成分が薄く付着した状態で継続使用すると変色、退色の恐れがあるため、洗浄をしっかりと行うこと。
  - ⑪薬剤消毒を行うときは、薬剤の添付文書または取扱説明書の使用指示に従うこと。
- (2) 本品は、患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分に配慮を行うこと。
- (3) 本品の切削や打刻（名前などを入れる等）などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
- (4) 印象材を除去する際にへら等でキズがつく場合があるので、十分注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。  
これらがある場合は使用を中止すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Adam's Aid Corporation（アダムスエイド社）

製造国：パキスタン