


BND フェイスマスク

【禁忌・禁止】

1. 歯列矯正治療以外の目的で使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

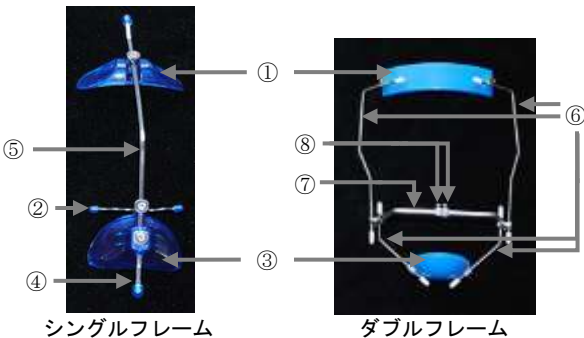

タイプ名	型番
シングルフレーム ブルー	FM1B-B
シングルフレーム レッド	FM1B-R
シングルフレーム イエロー	FM1B-Y
ダブルフレーム ブルー	RPFM2B-B
ダブルフレーム レッド	RPFM2B-R
ダブルフレーム イエロー	RPFM2B-Y

2. 原材料
シングルフレーム：ステンレススチール、ポリカーボネート
ダブルフレーム：ステンレススチール、アルミ、ポリカーボネート

3. 包装
・シングルフレームブルー、レッド
ダブルフレームブルー、レッド、イエロー
1 セット：本体、額パッド×2、顎パッド×2、調整レンチ×1、予備スクリュー×2
・シングルフレームイエロー
1 セット：本体、額パッド×2、顎パッド×2、調整レンチ×1、予備スクリュー×2

【使用目的又は効果】

歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える。

【使用方法等】

〔使用方法〕

■シングルフレーム

- (1) フォアヘッドレスト①、クロスバー②、チンカップ③、それぞれのスクリューを調整レンチで緩める。
- (2) フォアヘッドレスト①を患者の額の中心、チンカップ③を顎に配置する。

- (3) 患者のサイズに合わせ上下の位置を決め、スクリューを締め固定する。ストッパー④より下に出ている余分な部分は、キャップを外し、カッティングディスク等で切り取る。キャップを再度取り付ける。
- (4) クロスバー②はメインフレーム⑤に沿って移動させ、上下の位置を調整して位置を決める。位置が決まったら、スクリューを調整レンチで締めて固定する。
- (5) エラスチック（別売）はクロスバー②の両側から伸ばして、口腔内にある装置のフックにかける。

■ダブルフレーム

- (1) フォアヘッドレスト①、チンカップ③、横フレーム⑦、それぞれのスクリューを調整レンチで緩める。
- (2) フォアヘッドレスト①を患者の額の中心、チンカップ③を顎に配置する。
- (3) 患者のサイズに合わせ上下、左右の位置を決め、スクリューを締め固定する。
- (4) 横フレーム⑦はフレーム⑥に沿って移動させ、調整して位置を決める。位置が決まったら、スクリューを締めて固定する。
- (5) エラスチック（別売）は、位置を調節した接続アルミ⑧から伸ばして、口腔内にある装置のフックにかける。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ストッパーのスクリューはしっかりと締めること。
- ・ストッパー④から下に出ているメインフレームの余分な部分は必ず切り取ること。
- ・交差感染を防ぐため本品は一人の患者以外に使用しないこと。

【使用上の注意】

- (1) 本品を患者に渡す場合は、必ず適切な指導を行うこと。
- (2) 劣化や以上が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- (3) 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時には無理な力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- (2) 洗浄した後は、「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、キズ、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.
(ハンゾウ ジェンシング メディカル アパラス社)
製造国：中華人民共和国