

機械器具（50）開創又は開孔用器具

一般医療機器 歯科用開口器 JMDN コード：70949000


オーラルビュー

*【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り

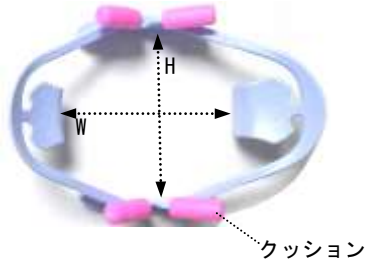

タイプ	カラー	サイズ
L	ブルー	W65×H61.5
M	ホワイト	W61×H59

(単位：mm)

- 原材料
フレーム：ポリカーボネート
クッション：TPE(熱可塑性エラストマー)

- 包装
1 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品を口角に引掛け、患者の口腔内の視野を確保する。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みか確認する。
(オートクレーブ滅菌可。121℃以下厳守。乾燥工程不可。)
- 開口した患者の口腔内に挿入し、視野を保持する。

*【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 洗浄・滅菌について
[洗浄]
・使用後は歯科用洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールはキズの原因となるので使用しないこと。

[滅菌]

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。
【オートクレーブ温度、121℃以下厳守。乾燥工程不可。】
※器具が変質、変形又は変色するため、乾燥工程は行わないこと。

[その他]

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前、使用後は、破損、ヒビ、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.
(ハンゾウ ジェンシング メディカル アパラス社)

製造国：中華人民共和国