

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN コード：38782000


再使用禁止

新トランスペアレントクラウンキット（乳歯用）

*【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

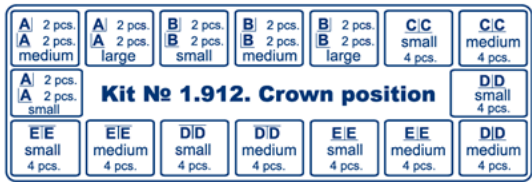

歯式	適用部位	サイズ
A	上顎・中切歯（右）	S, M, L
A	上顎・中切歯（左）	S, M, L
B	上顎・側切歯（右）	S, M, L
B	上顎・側切歯（左）	S, M, L
C/C	上顎・犬歯（左右）	S, M
D/D	上顎・小臼歯（左右）	S, M
E/E	上顎・小臼歯（左右）	S, M
D/D	下顎・小臼歯（左右）	S, M
E/E	下顎・小臼歯（左右）	S, M

2. 原材料
プラスチック

3. 包装

セット：A (S・M・L) A (S・M・L) B (S・M・L) B (S・M・L) 各 2 個

C/C (S・M) D/D (S・M) E/E (S・M) D/D (S・M)
E/E (S・M) 各 4 個

単品：A (S・M・L) A (S・M・L) B (S・M・L) B (S・M・L)
C/C (S・M) D/D (S・M) E/E (S・M) D/D (S・M)
E/E (S・M) 10 個 / 箱

【使用目的又は効果】

歯冠のコンポジットレジンによる築盛時に歯牙形態用として用いるもので、コンポジット硬化後に除去するものである。場合によっては即時重合レジンを使用することも可能である。

【使用方法等】

- 適切なサイズを選んで、はさみで希望のサイズにカットする。
- 修復する歯に試適する。
- 探針で本品の切端に小さな穴をあける。
- 修復歯にエッチングとボンディングをそれぞれの添付文書に従って行う。
- 本品の中にコンポジットレジンを入れる。（気泡を防ぐために、本品の切端にあけた穴からコンポジットレジンを少し出す）

- コンポジットを満たした本品を修復歯にかぶせたら、すぐに指でしっかりと固定する。
- 探針が鋭いスケーラーですぐに余剰のコンポジットレジンを除く。
- 化学重合型のコンポジットレジン、本品を除去する前に硬化させる。光重合型のコンポジットレジンでは所定の光照射後に本品を除去できる。
- コンポジットレジンが硬化した後、修復歯から本品を探針が鋭いスケーラーで切断して除去する。
- エナメル質とコンポジットレジンのマージンを仕上げて、調整を行う。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に劣化、破損、傷、腐食などがないかどうか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：TOR VM Ltd（ティーオーアールブイエム社）
製造国：ロシア