

機械器具（09）医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 歯科用 X 線ビームアライメント装置 JMDN コード：31828000

撮影用ポジショナー

【禁忌・禁止】


- 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしない事。

*【使用上の注意】

本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り

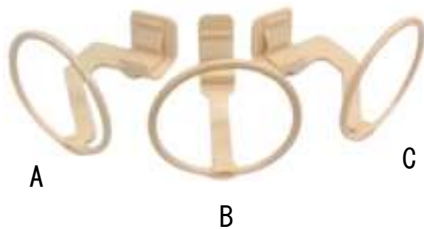

番号	適用部位
A	左上右下臼歯部
B	前歯部
C	右上左下臼歯部

- 原材料

ポリカーボネート、着色剤

- 包装

- ・単品：3 個 / 包
- ・セット：3 個（各タイプ 1 個入り）/ 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科 X 線撮影時に、歯科用 X 線フィルムをフィルムホルダーに挟み、患者の口腔内に挿入することにより、X 線フィルムを適切な位置に支持及び配置するために用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 使用前に本品が滅菌済みかどうか確認する。（オートクレーブ滅菌乾燥工程を含む 121℃以下厳守。）但し滅菌は滅菌バッグに入れて取り扱うこと。
- 撮影部位に合わせた本品を選択する。
- 歯科用 X 線フィルムを本品に装着する。
- 確実に固定されたことを確認後、口腔内に挿入し、通法に従い撮影を開始する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・本品は患者の口腔内に挿入して使用するので、口腔粘膜等を傷つけないように注意すること。
- ・本品を使用する際、折れたり曲がったりする恐れがあるので、無理な角度や過度な加圧での使用は避けること。
- ・本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはいしないこと。

*【保守・点検に係る事項】

- 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌
〔洗浄〕
 - ・洗浄、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
〔滅菌〕
 - ・オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守。
 - ・変色や品質に影響を及ぼすことがあるので、化学作用による滅菌は行わないこと。
〔その他〕
 - ・薬液消毒を行う際は、薬剤の添付文書に記載の使用上の注意を守ること。（薬剤の種類によっては本品の品質に影響を及ぼすことがある）

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地