

機械器具（02）医療用照明器
一般医療機器 移動型診療用照明器 JMDN コード：36843000

LED エグザミネーションライト


【禁忌・禁止】

- ・目の組織を損傷する恐れがあるので、点灯中のライトを直視したり、目の診察に本品を使用しないこと。
- ・外科手術用の照明として使用しないこと。
- ・MRI 装置のそばや、強磁気環境下、爆発の可能性がある区域で使用しないこと。
- ・可燃性麻酔ガスや高濃度酸素雰囲気内で使用しないこと。
- ・器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

以下のとおり。

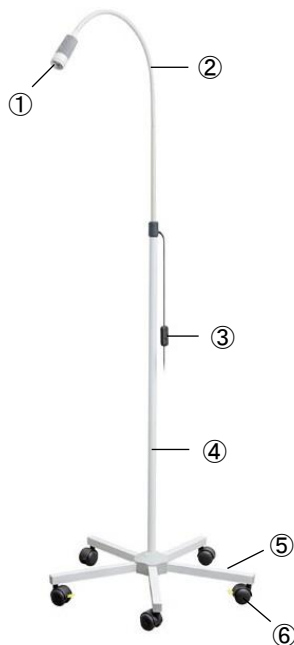

①	ライト(発光部)
②	アーム
③	電源スイッチ
④	ストレートパイプ
⑤	脚部
⑥	キャスター

2. 仕様

光源：LED ランプ
色温度：4,000 K
照度：50,000 lx
電源電圧：AC 100～240 V、50/60 Hz

3. 包装

1 台 / 箱

【使用目的又は効果】

軽症の診療及び治療時に用いる移動型の照明器である。

【使用方法等】

〔使用方法〕

詳細については取扱説明書を参照すること。

- 1) 取扱説明書をよく読み、組み立てる。
- 2) キャスターのロックを外してから移動する。
- 3) 設置する場所が決まったら、キャスターを必ずロックする。
- 4) コンセントに電源プラグを差し込んで電源スイッチをオンにし、光を照射する。
- 5) 使用後は電源スイッチをオフにし、コンセントから電源プラグを抜く。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・使用前に、かならず各接続部がしっかり接続されていることを確認すること。
- ・本品を使用する前にキャスターのロックがかかっていることを確認すること。
- ・点灯中、消灯直後の発光部やその周辺に触れたり、発光部を布などで覆ったりしないこと。
- ・対象から 20cm 以上離して照射すること。
- ・電源スイッチを入れたと、一度点滅したあとに安定した照明光が照射されます。この点滅は正常な状態です。

【使用上の注意】

- ・水のかからない場所に設置すること。
- ・濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- ・引火性のものや可燃物を近くに置かないこと。
- ・電源コードを曲げたり、引っばったりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・必ず使用前点検を行なうこと。異常があった場合は使用しないこと。
- ・使用後は必ずクリーニングを行うこと。電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いたのち、全体を少量のアルコールを含ませた柔らかい布で拭く。
- ・消毒にはアルコール系消毒剤が適している。消毒剤の製造元の指示に従って使用すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：LUXAMED GmbH & Co. KG（ラクサメッド社）
製造国：ドイツ