

機械器具（48）注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 JMDN コード：13929001

再使用禁止


Ci ディスポシリンジα

*【禁忌・禁止】


再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】

- 1) 形状・構造
下記の通り

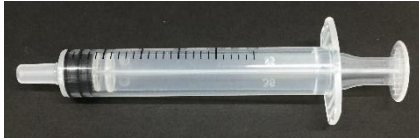

ルアースリップ

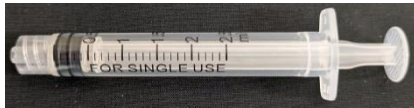

ルアーロック

- 2) 原材料

ポリプロピレン、ポリイソブレン

- 3) 包装

ルアースリップ

1 mL	中口	100 本/箱
2.5 mL	中口	100 本/箱
5 mL	中口	100 本/箱
10 mL	中口	100 本/箱
20 mL	横口	50 本/箱
50 mL	横口	50 本/箱

ルアーロック

2.5 mL	100 本/箱
5 mL	100 本/箱
10 mL	100 本/箱
20 mL	50 本/箱
50 mL	25 本/箱

【使用目的又は効果】

本品は液体やガスの注射、注入、採取に用いる。

**【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 個包装を開封する。
- 2) 注射針等を取り付ける場合は、筒先の汚染に注意して、しっかり確実に取り付ける。
- 3) プランジャーを押し、外筒内部から空気を完全に押し出す。
- 4) 適宜、注射、輸液などを行う。
- 5) 使用後は安全に留意して廃棄する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用前、接続部に緩みのないことを確認すること。また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れについて、定期的に確認すること。
- 2) 接合部に適用する液体等を付着させないこと。接合部の緩み等を引き起こす可能性がある。
- 3) プランジャーを無理に引かないこと。
- 4) 外筒の目盛を超えてプランジャーを引かないこと。プランジャーが外筒から抜けて、液漏れする可能性がある。
- 5) プランジャーを引く際は、ガスケットと外筒が密着した状態を保つためまっすぐに引くこと。〔液漏れ、空気の混入の恐れあり。〕

- 6) 注射針等を接続して使用する場合は、針刺し事故に注意すること。
- 7) 特に細い注射針などを使用する場合は、圧をかけすぎないこと。針が本体から外れてしまい損傷の原因となる。
- 8) 目盛を擦ったり、薬液等を付着させると、印字が剥離するおそれがあるので注意すること。

*【使用上の注意】

- 1) 包装が破損しているものや汚れているもの、製品に破損等の異常が認められるものは使用しないこと。
- 2) 開封後すぐに使用すること。
- 3) 本品に薬剤が残留した状態で保存しないこと。
- 4) オートクレーブ滅菌不可。
- 5) 器具の形態変更等は行わないこと。
- 6) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

（20YY/MM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す）

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地