

ミンストン LED6

【警告】


1. 本品の周辺に患者以外（特に子供）を近づけないこと。やむを得ず近づける場合、患者以外の安全にも配慮すること。
2. 本品の分解・改造はしないこと。

【禁忌・禁止】

1. 本品の光源を直視しないこと。
目が眩んだり、目の組織（網膜）に障害を引き起こす可能性があるため。
2. ヘッドランプ部を布等で覆わないこと。
ヘッドランプ部が過熱する恐れがあるため。

【形状・構造及び原理等】

- 1.形状・構造
下記の通り

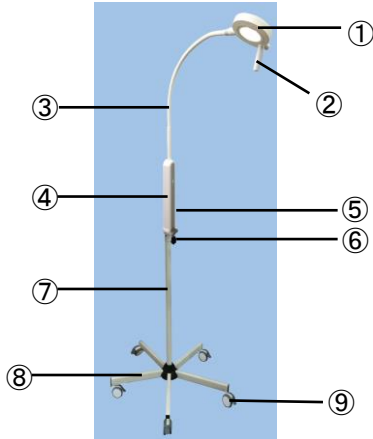

①	ライトヘッド
②	ハンドル
③	フレキシブルアーム
④	コントロールボックス
⑤	ON/OFF ボタン
⑥	固定ハンドル
⑦	スタンド支柱
⑧	ベース
⑨	キャスター

- 2.原材料
ABS 樹脂、鉄、PVC 被覆金属

3.仕様

光源	LED 発光ダイオード
入力定格電圧	100～260V 50/60Hz
中心照度	約 44,000lux (距離 500mm)
照射範囲	約 Ø180 mm (距離 500mm)
色温度	4,200～4,500K
LED 部消費電力	6W

4.包装

セット:一式 / 箱
セット内容:本体、専用スタンド、ベース

【使用目的又は効果】

本品は、軽症の診療及び治療時に用いる医療用照明器具。ある場所から別の場所へ容易に移動できるよう設計されている。

【使用方法等】

〔使用前の準備〕

- 1) 取扱説明書をよく読むこと。
- 2) 設置場所に移動し、「キャスター(⑨)」にロックをかける。
- 3) 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 4) 「ON/OFF ボタン(⑤)」の「|」側を押し、本体の電源を入れる。電源が入るとライトが一度点滅する。

〔使用方法〕

- 1) 「コントロールボックス(④)」の「」を押し、ライトを点灯させる。
- 2) 「ハンドル(②)」を持ち、ランプヘッドとフレキシブルアームを動かし、照射角度及び照射距離を調整する。
- 3) 「固定ハンドル(⑥)」を締緩することにより、上部全体の角度を変えることができる。
- 4) 「コントロールボックス(④)」の「▲」「▼」で照度の調節ができる。
- 5) 再度「コントロールボックス(④)」の「」を押すと消灯する。
- 6) 使用しない時は「ON/OFF ボタン(⑤)」の「○」側を押し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

〔作業環境〕

温度	-10～+40℃
湿度	85%未満
大気圧	86.0～106.0 kPa

【使用上の注意】

〔使用注意(次の患者には慎重に適用すること)〕

他の治療において、強い光に曝露しないように注意喚起されていないか、また既往歴として光線過敏症がないかを患者に確認し、該当する場合は治療部位以外(皮膚等)に光が当たらないように注意して使用すること。

〔重要な基本的注意〕

- 1) 振動のない安定した場所で使用すること。
- 2) 点灯中及び消灯直後は、LED 電球及びヘッドランプが高温になっている場合があり、やけどの恐れがあるので触れないこと。
- 3) 点灯中は照射項を直視したり、患者の目に当てないこと。
- 4) 使用中に体が過敏に反応し、めまいや吐き気などを引き起こした場合は、照度を落としたり、必要な時以外は消灯するなどし、長時間強い光が目に入らないようにすること。
- 5) 電源コードの上に物を置かないこと。
- 6) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるため、速やかに清拭すること。
- 7) 清掃する前に電源コードを外し、清掃の際は液体洗剤を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 2) 水のかからない場所に保管すること。
- 3) 傾斜、振動、衝撃などに対する安定状態に注意すること。

〔定期交換部品〕

LED 電球寿命:平均 50,000 時間

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず危機が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 3) 機器の分解・改造はしないこと。
- 4) 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル
住所: 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者: Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
(シャントウ イージーウェル エレクトロニック テクノロジー社)
製造国: 中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。