

再使用禁止

スーパートラクト

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 本品の成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症を有する患者には使用しないこと。
3. 重度の歯周病疾患部位、外傷のある部位等、本材のペーストが残留しやすい箇所には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 原材料
カオリン、塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物 他
3. 包装
0.5g×20 カプセル / 箱

【使用目的又は効果】

支台歯形成、印象採得などの際に、歯肉を圧排するために一時的に用いる。

【使用方法等】


〔使用方法〕

1. 準備
 - 1) パックを開封し本材を取り出す。
 - 2) 本材をディスペンサーガンに装着し、しっかり固定されていることを確認する。
 - 3) 本品のキャップを取り外し、廃棄する。

2. 歯肉圧排



- 1) 使用部位を洗浄し軽く乾かす。
- 2) 洗浄・乾燥した歯肉溝に本品の先端を挿入する。
- 3) 先端を歯肉に密着させ、ペーストをゆっくりと歯肉溝に注入させる。余剰なペーストが歯肉溝から出てくるまで歯の全周に十分な量を注入する。
※本品は圧排糸や他の圧排方法の代わりに、又は併用して使用することが可能である。
- 4) 注入後、2分間そのままの状態にしておく。

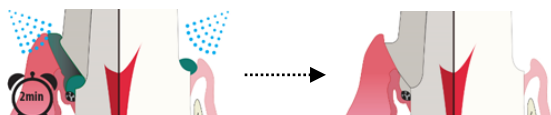

3. 除去

- 1) 圧排完了後、水及びエアー、バキュームを併用して歯肉溝からペーストを完全に除去する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 各包装開封後は直ちに使用すること。
- 2) キャップの取外しは使用直前に行うこと。
- 3) 組織に炎症等の障害を与えないように、長時間ペーストを適用したままにしないこと。
- 4) 患者がペーストを飲み込まないように注意すること。
- 5) 深い歯肉溝(歯周ポケット)には注入しないこと。
- 6) ペーストが口腔内に残留しないよう、しっかりと洗浄し、確認を行うこと。
- 7) 口腔内に塗布する前に、板紙などに少量を試し出ししてから使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 医療従事者は保護メガネなどを着用すること。万一、目に入った場合は直ちに、大量の流水で十分に洗浄し、専門医(眼科医)の診察を受けること。
- 2) 使用後は、カートリッジをバレルから外し、キャップを必ずカートリッジに被せること。
- 3) 本品のペーストは金属を腐食させるため、インスツルメントをに付着したペーストはすぐに洗い流すこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 30℃以下で保管すること。(冷蔵庫に入れないこと)
- 2) 直射日光の当たらない粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：EASTDENT Co., Ltd. (イーストデント社)
製造国：大韓民国