

機械器具（50）開創又は開孔用器具
機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 歯科用開口器 JMDN コード：70949000
（一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN コード：37434000）

再使用禁止


バイトサクション

【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り

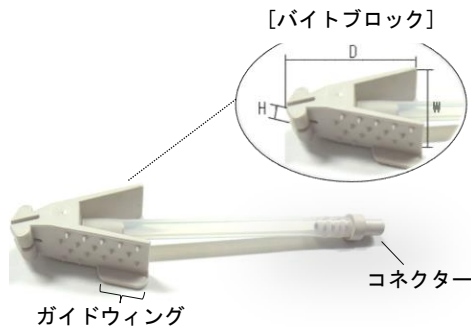

バイトブロック	コネクター部径	全長
W2.7×D4.4×H1.0	φ0.65	13.76

(単位：cm)

- 原材料

バイトブロック、コネクター：ポリフェニルスルホン樹脂
チューブ：シリコン

- 包装

バイトサクション 10 個 + 清掃用ブラシ 1 個 / 包

【使用目的又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持する。また、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

- 使用する前に、適切な洗浄・滅菌を行う。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守。）
- 本品のコネクター部を非能動型の吸引装置に装着する。
- バイトブロックをガイドウイングが頬粘膜に接するよう、臼歯の咬合面に置き、開口の状態を維持する。
- 吸引口が最後臼歯後方にあることを確認し、歯科用吸引装置を操作し、口腔内の唾液等を除去する。

【使用上の注意】

- 本品の使用はディスポーザブルとし、再使用を禁止する。
- 本品は未滅菌のため、使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工を行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 本品に損傷、変形（ひび、割れ）等があるものは使用しないこと。
- チューブの過度な曲がりは吸引を妨害する恐れがある。
- 小児または嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるため、使用する際は十分に注意すること。

7) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- 洗浄を行う時の洗浄剤の濃度、温度、時間等に関しては洗浄剤の取扱説明書に従うこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 121℃以下厳守】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、変色等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：SeilGlobal Co., Ltd.（セイルグローバル社）
製造国：大韓民国