

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科用顔弓 JMDN コード：35700000

再使用禁止


フェイストランスファーバイト

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

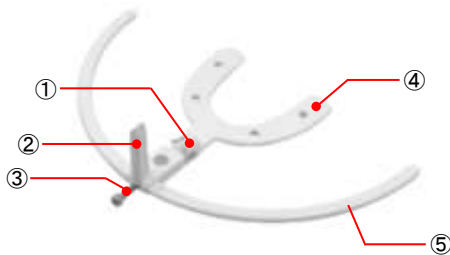

①	固定ポイント
②	インジケーター
③	固定ネジ
④	バイトフォーク
⑤	フェイスボウ

2. 原材料

ポリカーボネート

3. 包装


2 個 / 包

【使用目的又は効果】

側頭下顎関節（又は顎の開口運動軸）に対する上顎弓の相対位置を記録するほか、口腔模型を顎の開口運動軸と同じ関係に合わせるために用いる。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が消毒済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌不可。アルコール消毒液を含ませた柔らかい布等で清拭すること。）
- 通法に従って、本品を患者の口腔内にセットする。
- 顔の基準平面に合わせ、角度を合わせる。
- 正面から瞳孔線とボウが平行であるかを確認し、印象を採得する。（下図参照）

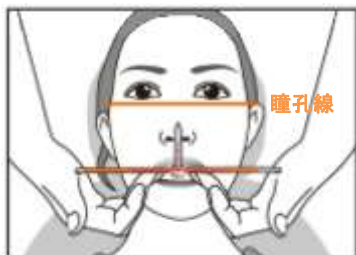

5. 固定ポイントを接着剤で固定する。

6. 本品を口腔内から取り外し、取得した咬合情報を咬合器を用いて作業模型に転記する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、消毒を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 無理な角度や過度な加圧での使用は、折れたり曲がったりすることがあるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られる場合は、器具の使用を中止すること。
- 廃棄の際は、感染防止に留意し関連法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか点検すること。これらが確認された場合は使用しないこと。
- 使用前は、アルコールを含ませた柔らかい布等で表面を拭き取り、消毒すること。（オートクレーブ滅菌不可）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：High Dental Korea Co., Ltd.

（ハイデンタルコリア社）

製造国：大韓民国