


スリーウェイシリンジ DA


*【形状、構造及び原理等】

1) 外観

①SYR-1200A

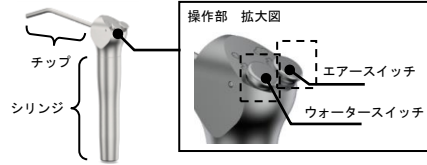

②SYR-1200B

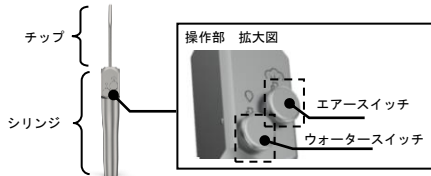

2) 原材料

ステンレススチール、銅、ゴム

3) 包装

本体＋交換ノズル/包

4) 仕様

- ・給水圧力 0.2～0.275 MPa
- ・供給空気圧 0.41～0.55 MPa

*【使用目的、効能又は効果】

創面清掃の目的で処置する部位（窩洞やう窩）を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 使用する前にチップが滅菌済みか確認すること。チップのみオートクレーブ滅菌可。121℃で 20 分。
- 2) シリンジにチップを装着する。
- 3) ウォータースイッチ、エアースイッチを押し、流量ならびに空気流量を調節する。ウォータースイッチ、エアースイッチを両方押すと水とエアの混合が噴霧される。
- 4) 口腔内で使用する前に必ず、エアと水の噴霧状態を確認し使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 能動型機器に接続の際は緩みのないようしっかりと接続すること。
- 2) 指定の圧力を超えて使用しないこと。

*【使用上の注意】

- 1) 交差感染を防ぐため、チップは患者ごとに滅菌を行うこと。
- 2) 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 3) 落下等、過度な衝撃を与えないこと。
- 4) 故障の際は使用を中止し、修理を専門家に任せること。
- 5) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 2) 直射日光に長時間さらされないこと。
- 3) 滅菌後、滅菌バックに入れたまま保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前に異常がないことを確認してから使用を開始すること。
- 2) 長期保管した場合は、使用前に十分点検を行ってから使用すること。
- 3) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

チップのみオートクレーブ滅菌可【オートクレーブ条件、121℃で 20 分】

乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Suzhou Join Precision&Technology Co.,Ltd.

（スーチョウ ジョイン プレシジョン アンド テクノロジー社）

製造国：中華人民共和国