


サイレンスサクシオントラボモーター

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



【操作パネル】

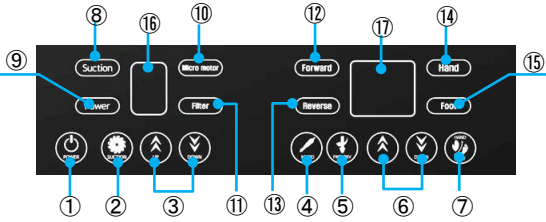

①	名称	⑩	名称
①	POWER キー	⑩	マイクロモーター表示 LED
②	SUCTION キー	⑪	フィルター表示 LED
③	吸引パワーレベル調整キー	⑫	正回転表示 LED
④	MICRO キー	⑬	逆回転表示 LED
⑤	FWD/REV キー	⑭	Hand モード表示 LED
⑥	回転スピード調整キー	⑮	Foot モード表示 LED
⑦	HAND/FOOT キー	⑯	吸引パワーレベル表示部
⑧	Suction 表示 LED	⑰	回転スピード表示部
⑨	電源表示 LED		

2. 仕様

本体

寸法 (W×D×H)	295 mm×330 mm×750 mm
重量	14 kg
入力電源	AC 120 V 50/60 Hz
消費電力	1200 W

マイクロモーター

寸法	155 mm×φ30 mm
重量	210 g
最大回転数	35,000 rpm
最大トルク	3.2 N・cm

3. 包装

1 セット / 箱

セット内容：本体、マイクロモーター、フットコントローラー、ダスターボックス、ダスターフィルタ（一次フィルタ、ブラケット、2 次フィルタ (ULPA)、3 次フィルタ (Carbon)）、スキマー、ホールキャップ、LED 用コード（ショート、ロング）、電源コード

【使用目的又は効果】

切削器具等の回転器具を接続し、歯科技工における切削・研磨作業に用いる。

【使用方法等】

※使用前に必ず取扱説明書をよく読むこと。

【使用前の準備】

- 取扱説明書に従い、各構成品を本体に取り付ける。
- マイクロモーターのチャックを開き、歯科技工用バー（別売）を差し込む。チャックをしっかりと締めてバーを固定する。

【使用方法】

取扱説明書に従い、操作パネル上の①～⑦のキー及びフットコントローラーにより本品の操作を行う。

【使用環境】

温度：0～40℃
湿度：20～80%（結露なきこと）

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本体に電源コードを接続する際は、電源がオフになっていることを確認すること。
- ・マイクロモーターにバーが確実に固定されていることを確認すること。
- ・作業開始前に試運転を行い、バーに振れがないか確認すること。
- ・回転方向の変更は、回転を停止させてから行うこと。

【使用上の注意】

1. 使用時、又は点検時に振動、音、発熱等の異常が確認された場合は使用を中止すること。
2. 切削時は防護眼鏡、保護マスク等を着用すること。
3. 落下させるなどの強い衝撃を与えないこと。
4. 水のかからない場所に設置すること。
5. 機器の改造や分解をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所で保管すること
3. マイクロモーター表面はアルコールで拭き取り、清潔な状態で保管すること。本体表面は湿った布でふき取ること。

【保守・点検に係る事項】

1. 必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず危機が正常かつ安全に作動することを確認すること。
3. 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：KO-MAX Co., Ltd. （コマックス社）
製造国：大韓民国