


パリュールGPカッター

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

[本体]

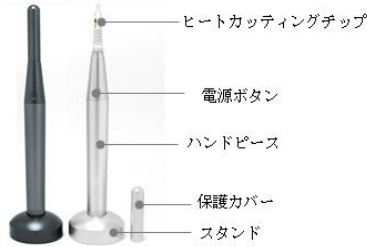

[ヒートカッティングチップ]

Q1		U1	
Q2		U2	
Q3		U3	
Q4		U4	

2. 原材料

チップ: ニクロム合金

3. 仕様

定格電圧: 単 3 形 1.5V 電池 2 本
電撃に対する保護の形式: 内部電源
電撃に対する保護の程度: B 形装着部

4. 包装

セット: 1 セット / 箱
単品: 1 個 / 包

【使用目的又は効果】

ハンドピース先端に取付けたチップを加熱し、ガッタパーチャポイント等の充填材料の輪郭研削に用いる。

【使用方法等】

※取扱説明書をよく読むこと。

[使用前の準備]

- バッテリーカバーをはずし、単三電池 2 本をつける。
- ヒートカッティングチップ（以降、チップという）が滅菌済みかどうか確認すること。（チップのみオートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守。）
- チップをハンドピースに装着する。

[使用方法]

- チップ先端を切断するガッタパーチャポイント等（以下、ポイント等という）切断部付近に配置する。
- ポイント等の切断位置にチップ先端を接触させ、電源ボタンを押す。
- 電源ボタンを押したままポイント等を切断する。
- 切断後は、電源ボタンを放す。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 火傷の恐れがあるため、使用中はチップに触れないこと。
- 破損の恐れがあるため、チップに必要以上の力を加えないこと。
- スイッチの接触状況や、ヒートカッティング部分の破損等がないかを患者ごとに必ず行ない、機器が正確に作動することを確認すること。

- 本品及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。

【使用上の注意】

- 本品の使用により、過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートカッティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。
- 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

※詳細については取扱説明書の保守・点検の項を必ず読むこと。

- 必ず定期点検を行なうこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。
- 機器の分解・改造はしないこと。
- 故障した場合は、直ちに製造販売業者若しくは販売業者へ連絡すること。
- 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- 使用後はチップに付着したガッタパーチャポイント等の練充填材料を綿球等で丁寧に取り除くこと。
- ハンドピースや専用スタンドを拭く際には、塩素を含んでいない消毒剤を使用すること。

[滅菌]

- ヒートカッティングチップは、オートクレーブで滅菌可。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む、134℃以下厳守】※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
 - 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。
 - 本品を 20 秒以上連続で使用した場合は、10 秒以上の間隔をあげ、再度使用すること。
 - 本品には単三形以外の電池を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル
住所: 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者: Foshan M kong Medical Instrument Co., Ltd.
(フォーシャン エム コング メディカル インストルメント社)
製造国: 中華人民共和国