

再使用禁止

ニッケルチタンコイルスプリング


【禁忌・禁止】

1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

クローズコイルスプリングタイプ

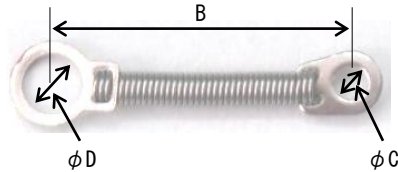

単位：mm

種類	素線径	アイレットサイズ				B 長	
		φC	φD	φD	φD		
ウルトラライト	0.17	1.5	1.5	2.0	2.5	8	13
ライト	0.21	1.5	1.5	2.0	2.5	8	13
ミディアム	0.23	1.5	1.5	2.0	2.5	8	13
ヘビー	0.23	1.5	1.5	2.0	2.5	8	13

オープンコイルスプリングタイプ

素線径：φ0.25 mm



2. 原理

スプリングの復元力により、矯正力を部分的に付加する。

3. 原材料

- ・クローズコイルスプリングタイプ
ニッケルチタン合金、ステンレススチール
- ・オープンコイルスプリングタイプ
ニッケルチタン合金

4. 包装

クローズコイルスプリングタイプ 10 個 / 包
オープンコイルスプリングタイプ 530 mm / 個

【使用目的又は効果】

バネ状で矯正力を発生させるために用いること。

【使用方法等】

クローズコイルスプリングタイプ

- 1) 患者に適したブラケット及びチューブを装着する。
- 2) 歯列矯正する程度に合せスプリングの長さ又は張力を選択する。
- 3) 縮小したい歯間両側のブラケットにアイレットを装着する。

オープンコイルスプリングタイプ

- 1) スプリングを適切な長さにカットする。
- 2) 矯正用ワイヤーに通し、拡大したい歯間にコイルスプリングを配置する。
- 3) コイルスプリングが適切に配置されるように矯正用ワイヤーをブラケットあるいはチューブのスロットに装着する。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意

ニッケル又は本品に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、本品の使用により過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けること。

2. 重要な基本的事項

- 1) 本品は、再使用しないこと。
- 2) 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
- 3) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 4) 本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 5) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

・【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：JISCOP Co., Ltd.（ジスコップ社）

製造国：大韓民国