

再使用禁止

マルチチューブ

【禁忌・禁止】

1. ニッケル及びクロムに対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品はロスタイプ、MBT タイプ、OSSTEM タイプの 3 種類からなり、キャップの有無によりコンバーチブルタイプ、ノンコンバーチブルタイプがある。

形状、構造は下記のとおり。

代表例: #6 上顎/下顎

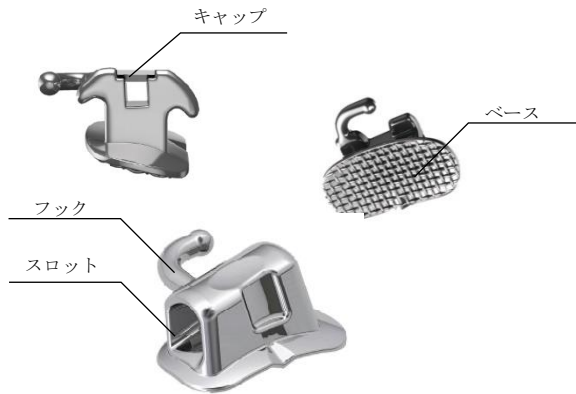

2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

本品はステンレススチール製の歯列矯正用チューブであり、歯科用接着材により歯面に接着された後、スロットに挿入された矯正用ワイヤにより、矯正力を付与することで歯を所定方向に移動させる。

【使用目的又は効果】

歯列矯正用ワイヤなどをはめ込み、歯の正しい配列状態の確保に用いる。

【使用方法等】

【矯正前】

1. 矯正用途に応じて患者の歯に適した本品を選択する。
2. 歯科用接着材(以降、接着材という)、矯正用ワイヤ等(以降、ワイヤ等という)の関連器具を準備する。
3. 本品の部位、方向、角度、位置を確認し、歯面に位置決めを行う。

【矯正治療】

1. 使用する接着材の使用書に従って、歯面の清掃ならびに前処理を行う。
2. ベース部に汚れの付着等がないか確認し、歯面に接着させる。
3. 接着材の十分な硬化後、ワイヤ等の矯正用器具の装着を行う。

<キャップの取り外し>

リムービングプライヤ等を用いてキャップ部を取り外し、注意して口腔外へ取り出す。

【矯正後】

1. 歯列矯正治療後、ワイヤ等の関連器具を除去する。
2. デイボンディング用のインスツルメントを使用し、歯牙から本品を取り除く。歯面に付着した残留接着材はパーなどを用いて低速で除去する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. キャップの取り外しの際は、落とさないよう注意して口腔外へ取り出すこと。
2. 油脂などにより、適切な接着力が得られなくなるので、ボンディングベースを直接手で触らないこと。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

1. 本品に含まれるニッケル、クロム等によりアレルギー反応が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
2. 口腔内での脱落は、誤飲、誤嚥につながる可能性があるため、取扱には最新の注意を払うこと。
3. 施術中に脱落や変形が生じた場合は、使用を中止し新しいものと交換すること。
4. スロットに接着材が付着しないよう注意すること。ワイヤー装着の妨げになる恐れあり。

2) 使用上の注意

1. 本品は再使用しないこと。
2. 歯科用接着材を使用する際は、各製品の使用書に従うこと。
3. 接着材の多量の適用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温多湿、直射日光及び水濡れを避け、常温で保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル

住所: 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者: OSSTEM ORTHODONTICS Inc.

(オステム オーソドンティックス社)

製造国: 大韓民国