


【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 構成

1) シリンジ

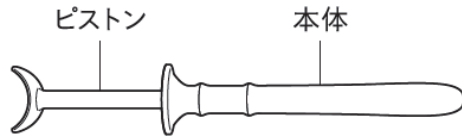

2) カップ

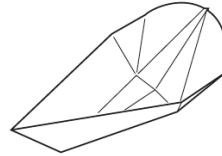

2. 体に接触する部分の原材料

本体：MABS 樹脂・有機顔料、ピストン：ABS 樹脂・合成樹脂用着色剤、リング：シリコーンゴムポリマー、カップ：ポリエチレン・紙

3. 原理

本品は、膈内に挿入し、ピストンを押すことにより精液を子宮内に注入する。

【使用目的又は効果】

本品は、膈内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。

【使用方法等】

① カップに精液を採取する。② 本体にリングが装着されているピストンを差し込み最後まで入れ込む。③ カップから精液をゆっくり吸引する。④ シリンジの先端を膈内に挿入する。⑤ 精液の注入後、シリンジを抜去する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

① 使用目的以外の使用はしない。② 本品は本文を読み、指示に従って使用する。③ 感染等の防止の為、清潔な状態で使用すること。④ 開封は使用直前に行うこと。⑤ 万一、包装が破損している場合は使用しないこと。⑥ 本品は単回使い捨て商品なので、1 回限りに使用のみで再使用しない。⑦ 使用期限を過ぎた製品は使用しない。⑧ 精液は採取し液状化 10~20 分程度放置後、速やかに注入する。⑨ 痛みを感じるときは無理せずに使用を中止する。⑩ 使用に不安を感じる場合は、使用前に専門医に相談する。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

① 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。② 本品は指示された方法で保管すること。不適切な保管は劣化や破損の原因になる。

<有効期間>

3 年〔使用期限をこの袋の下部に記載〕（自己認証による）

<廃棄方法>

使用後は各自自治体のルールに従って分別し捨てること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：親和工業株式会社

住所：埼玉県川口市西川口 6-7-14