

衛生用品(器 75)脱疾治療用具
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ JMDN コード 30883000

クオリマタニティ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 同一患者以外への再使用禁止。
- ・ 裁断加工禁止。


【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、腹部の臓器を正常な位置に保持し脱疾するのを防ぐ目的とするものである。骨盤及び腹部に巻いて腹部臓器の脱疾を防ぐほか、骨盤位置の矯正、妊婦帯として用いることができる。使用に応じたサイズがある。

2. 外観形状

1) 装着面

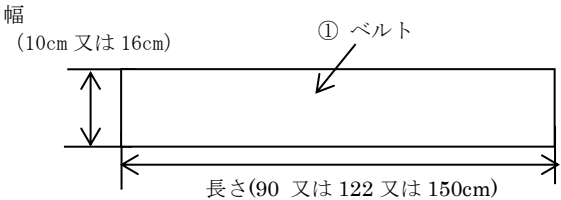

2) 表面

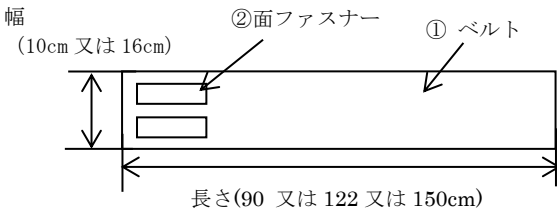

3. 種類

サイズ	ベルトサイズ (cm)	周囲長さ (cm)
QM10S	高さ: 10 長さ: 90	55～85
QM10M	高さ: 10 長さ: 122	85～110
QM10L	高さ: 10 長さ: 150	115～145
QM16S	高さ: 16 長さ: 90	55～85
QM16M	高さ: 16 長さ: 122	85～110
QM16L	高さ: 16 長さ: 150	115～145

4. 原理

伸縮性のある帯で腹部を固定することにより、腹部臓器の脱疾を防ぐほか、骨盤位置の矯正、妊婦帯として用いることができる。

【使用目的】

本品は、腹部の臓器を正常な位置に保持し脱疾するのを防ぐ目的とするものである。

【使用方法等】

1. 包装を開けます。
2. クオリマタニティを広げて、表裏を（製造元のラベルが貼り付けてある）を確認します。製造元のラベルが、外側を向いていることを確認してください。
3. ベルトの端を持ち、固定したい部分（腹部中央または下腹部）に持っていきます。反対側を持ち、適切な位置で締めます。締めたのち、位置と締め具合を微調整することもできます。クオリマタニティは、医師の指示や患者の判断で数日～数週間着用します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ ベルトを上腹部に巻かないでください。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品が汚れた場合は、30℃の水での選択の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・ 本品を乾燥機で乾燥はさせないこと。
- ・ 本品を繰り返し洗濯すると、弾力が弱くなることがあるので注意すること。
- ・ 選択した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社
東京都台東区西浅草 1-7-19
TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）
クオリチーム エスアールエル