

衛生用品（器 75）脱疾治療用具

一般医療機 脱疾治療用ストラップ JMDN コード：30883000

ルーバン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 同一患者以外への再使用禁止
- ・ 裁断加工禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 概要

本品は、ポリエステル製の布で縫製されたヘルニア患者の腹部を固定するためのベルトである。腹部の臓器を正常な位置に保持し脱疾するのを防ぐことを目的とする。ベルト枚数、サイズの違いにより各種ある。


2. 外観形状

3 本ベルト

1) 装着面

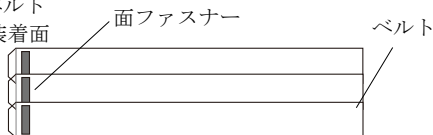


2) 表面

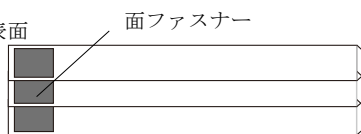


4 本ベルト

1) 装着面

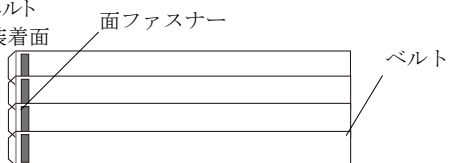


2) 表面

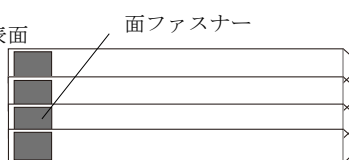


5 本ベルト

1) 装着面

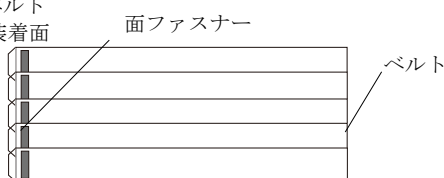

2) 表面

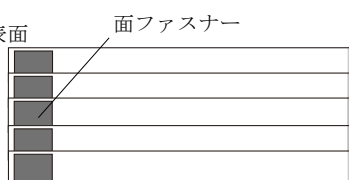

3. 種類

サイズ	長さ	幅			患者適用 サイズ
		3 本 ベ ル ト	4 本 ベ ル ト	5 本 ベ ル ト	
S	85	22	27	33	65-85
M	105	22	27	33	85-105
L	125	22	27	33	105-125
XL	145	22	27	33	125-145
XXL	165	22	27	33	145-165
XXXL	185	22	27	33	165-185
4XL	205	22	27	33	185-205
5XL	225	22	27	33	205-225

4. 原理

縮性のあるベルトで腹部を固定することにより、腹部臓器の脱疾を防ぐことができる。

【使用目的】

腹部の臓器を正常な位置に保持し脱疾するのを防ぐことを目的とする

【使用方法等】

1. 製品タグ（製造業者ラベル）が外側（患者に装着しない側）になるように本品を広げてベッドの上に置きます。
2. 腹部の創傷、ヘルニア、ドレーン及びストーマの位置に注意して、患者を本品の上に仰向けに寝かせます。
3. 必要に応じて各ベルトの締め付け具合を調整します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ ベルトを上腹部に巻かないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品が汚れた場合は、30℃の水での洗濯の他、ぬるま湯で部分的に洗浄することも可能である。
- ・ 本品を乾燥機で乾燥させないこと。
- ・ 本品を繰り返し洗濯すると、弾性が弱くなることがあるので注意すること。
- ・ 洗濯した場合でも、使用した患者以外の患者に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社

東京都台東区西浅草 1-7-19

TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：Qualiteam s.r.l.（イタリア）