

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
管理医療機器 皮下刺激用プローブ JMDN コード：36957002

inomed 刺激プローブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法

- ・再使用禁止 [交差感染のおそれ]
- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）内で使用しないこと。
[MRI 装置への吸着、過熱、火傷等のおそれ]

【形状・構造及び原理等】

形状

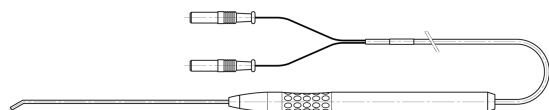

原材料

ステンレス鋼、ポリイミド、ポリプロピレン

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

温度：15℃～55℃
湿度：乾燥した場所に保管すること

有効期限

滅菌後 3 年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：JP クリード株式会社

東京都台東区西浅草 1-7-19
TEL：03-6912-1090 FAX：03-6912-1091

外国製造業者：inomed Medizintechnik GmbH（ドイツ）
（イノメッド メディズインテクニーク社）

【使用目的又は効果】

本品は、刺激装置で発生させた電流を用いて生体組織刺激のために用いるプローブであり皮下に適用する。

【使用方法等】

- 1) コネクタを誘発反応測定装置等の刺激装置に接続する。
- 2) 刺激装置を操作し、生体組織を刺激する。

組み合わせて使用する医療機器

本品と組み合わせて使用可能な機器（誘発反応測定装置）は以下のとおりである。当社が認めた医療機器以外と組み合わせて使用しないこと。

組み合わせて使用可能な電気刺激装置

販 売 名	医療機器認証番号
術中モニタリングシステム ISIS IOM	230AMBZX00004000
術中モニタリングシステム C2 Xplore	303AMBZX00004000

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・筋弛緩剤等は神経刺激に対する筋電図への反応を著しく低下させるため、筋弛緩剤等を併用しないこと。
- ・本品（及び刺激装置）を使用した手術は、目視による神経の位置確認や術中の不測の神経切断を避けるために必要な技術、経験、解剖学的知識を備えた医師のみが行うこと。
- ・プローブは、接続する機器の使用 방법에従い慎重に標的組織に適用すること。慎重に適用しても標的部の組織に損傷や出血が見られることがあるので留意すること。
- ・本品は心組織への適用は意図していないため、心臓へは使用しないこと。
- ・本品のケーブルと高周波ケーブルの最小距離を保つよう注意すること。[電磁干渉が発生するおそれ]
- ・本品使用中の電気手術機器（電気メス）等の使用は注意すること。また、本品を術野内へ放置したり、電気手術機器（電気メス）用のホルダー等へ保管したりしないこと。[患者が火傷するおそれ]
- ・心臓ペースメーカー又は他の植込み型機器へ電気刺激を行わないこと。[植込み型機器の動作に異常をきたすおそれ]

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。