

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント (JMDN:31872000)


ガッタパーチャポイント

【禁忌・禁止】

- ① 本品または本材に含まれる成分に発疹や皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者への使用は禁止
- ② 歯科用途以外の使用や非専門家の使用は禁止
- ③ 本品を内服用で処方することは禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

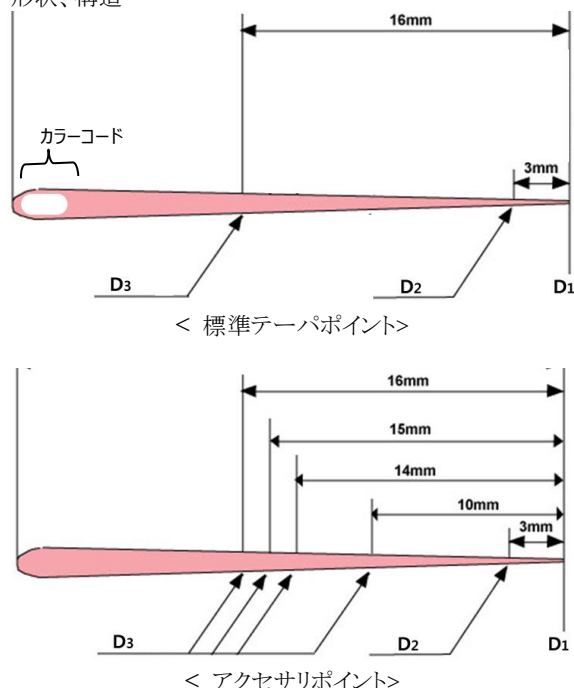

2. 型番

- (1) 標準テーパーポイント (2% テーパー)
10、# 15、# 20、# 25、# 30、# 35、# 40、# 45、# 50、
55、# 60、# 70、# 80、# 90、# 100、# 110、# 120、
130、# 140 (オプション: カラーコード)
- (2) アクセサリポイント
J-FS, J-FM, J-FL, J-S, J-M, J-L, J-LM, J-XL

3. 成分

ガッタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム、他

4. 性能

JIS T 6515 より以下の規格に適合する。
外観、X 線不透過性、長さ、脆弱性

5. 包装

メインポイント: 120 本/BOX、アクセサリポイント: 100 本/BOX
注: メインポイント、大テーパーポイント # 90、# 100、# 110
120、# 130、# 140 の場合は 60 本入り/BOX です。

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる材料である。

【使用方法等】

- (1) 根管の内部をファイル、洗浄剤、ペーパーポイントなどを用いて拡大、形成する。
- (2) 根管形成の最後に使ったファイルと同じサイズのガッタパーチャポイントを選択する。
- (3) 乾燥させた根管内にシーラーを塗り付ける。

- (4) ガッタパーチャポイントを根管に挿入する。
- (5) スプレッダーを挿入し、側方圧を加える。
- (6) スプレッダーを取り外したすき間にアクセサリポイントを挿入する。
- (7) 根管の空隙が充塞されるまでアクセサリポイントを追加して挿入する。
- (8) 根管口から出ているガッタパーチャポイントの上部を切除する。

【使用上の注意】

- (1) 発疹や皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
- (2) トランス 1-4 ポリイソプレンゴムは、個人によって敏感に作用することがあるため、既往歴のある患者には使用しないこと。
- (3) 本品は、口腔内の歯の組織でのみ使用し、目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合はすぐにきれいな水で洗い、眼科医に診断を受けさせること。
- (4) 本品は、歯科用途以外の使用や非専門家の使用を禁止する。
- (5) 本品を充填する際に、根尖孔を超えたり(Overfilling)、死腔(Dead Space)が生じないように充填すること。
- (6) 有効期間までに使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- (1) 常温で 高温多湿を避けて保管すること。
- (2) 火気又は直射日光にさらされないように保管すること。
- (3) ふたを閉めた状態で保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**選任製造販売業者: 株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目38-28 ジオビル
TEL: 092-409-4050 FAX: 092-409-4051
外国製造業者: META BIOMED CO., LTD. (Head office)
(メタ バイオメド)
製造所国: 大韓民国