

歯科材料 (05) 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用仮封材 70871002

キャビシール プラス


【禁忌・禁止】

- 本品または本材に含まれる成分に対してアレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品は白色またはピンク色のパテ状である。

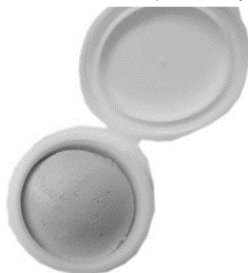

※写真はイメージです。

2. 容量

構成品名	色調	容量
キャビシール プラス	白	40g
	ピンク	40g
キャビシール プラス 30	白	30g
	ピンク	30g
キャビシール プラス 20	白	20g
	ピンク	20g

3. 原材料

塩化ビニル酢酸ビニル共重合物、酸化亜鉛、硬質石こう、
アジピン酸(2-エチルヘキシル)、ハッカ油、色素

【使用目的又は効果】

歯の仮封に用いる。

**【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 製品の漏れ、辺縁、変色などの異常状態を確認する。
- 製品の使用方法、使用上の注意、禁忌・禁止事項を十分に理解する。
- 製品の有効期間を確認する。

2. 使用方法

- 形成した窩洞を水洗後、窩洞を綿球で拭き取り過剰な水分を除去します。
- 必要量の本品を採取し窩洞に充填する。本品の適量を窩洞に充填し、輪郭成形する。I級窩洞の場合、患者に充填した表面を咬ませて、輪郭成形する。
- 湿った綿球で窩洞のマージンに向けて余分なものを拭き取る。
- 本品の硬化時間は2時間以内であるため、充填後2時間以内は、強く咬合しないように患者に指示する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 本品は水分との接触により硬化が促進されるため、濡れた器具などで採取しないこと。
- 使用後は、直ちにふたを閉め密閉すること。
- 本品が固まった場合は使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本品の使用により感作またはアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合には直ちに治療を中止して、専門医の診察を受けさせること。
- 本品は、歯科医師以外は使用しないこと

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 使用後は必ずふたを完全に閉めて保管する。
- 直射日光をさけ乾燥した室温（1℃～30℃）に保管する。
- 火気の近くに保管しない。

【有効期間】

- 製造日から3年

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**選任製造販売業者：株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目38-28 ジオビル

TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051

外国製造業者：META BIOMED CO.,LTD.(Head office)

(メタ バイオメド)

製造所国：大韓民国