

アンバー ミル H

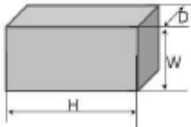
再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品又はメタクリル酸系のモノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・本品は再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・寸法

タイプ	W×D×H mm	形状
C10	10×8×15	
C12	12×10×15	
C14	14×12×18	

2) 色調

タイプ	色調
HT	A1、A2、A3 B1、B2 C1、C2
LT	W1、W2 A1、A2、A3、A3.5 B1、B2 C1、C2 D2

3) 主な原材料

無機質フィラー、メタクリル酸系モノマー、着色材

4) X 線造影性

X 線造影性を有する。

5) 原理

本品は、インレー、クラウン等の歯科修復物を作製するレジン系材料で、歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニットで切削加工するレジン製ブロックである。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、歯科高分子製補綴物作製に用いる。ただし、歯科用インプラント又は歯科用インプラントアバットメントの作製に用いるものを除く。

【使用方法等】

1) 準備

通法にしたがい、形成した修復部位を歯科用のスキャニングマシンにて光学印象採得する。

2) 歯科修復物の設計

症例に応じた本品の色調とサイズを選択し、光学スキャンしたデータをもとに歯科修復物を設計する。

3) 歯科修復物の加工

加工機に本品を装着し、設計したデータを用いて切削する。加工完了後、余剰のレストを除去し、歯科修復物に付着した切削屑なども除去する。

4) 形態修正・研磨

加工した歯科修復物を通法にしたがい形態修正および研磨する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・本品のサイズに適合しない CAD/CAM 装置には使用しないこと。
- ・不正咬合やブラキシズムを伴うような破折のリスクが高い症例では、本品の破折を避けるため、慎重に判断して使用すること。
- ・本品と併用して使用する歯科材料、機械は各添付文書やマニュアル等に記載の使用方法及び使用上の注意等を遵守すること。
- ・歯科修復物を装着する際には、余剰セメント材と取り除くこと。
- ・本品の作業設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、発生する粉塵及び蒸気等を吸入しないこと。
- ・切削や研磨作業などの際には、粉塵や破片による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した粉塵マスク、保護メガネなどを使用すること。
- ・使用前に破損の有無を確認し、異常を認める場合は使用しないこと。
- ・本品を床に落とした場合は、破損の有無を確認すること。
- ・CAD/CAM 装置(加工機)に本品を取り付ける際、本品を損傷しないように注意すること。
- ・CAD/CAM 装置(加工機)で加工する際、指等を巻き込まれないように注意すること。
- ・CAD/CAM 装置(加工機)に正確に装着すること。
- ・本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ・廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。
- ・本品の使用目的以外の用途には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・本品の使用により発疹・皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品の使用により発疹・皮膚炎等の過敏症状があらわれた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【その他の注意】

- ・患者に装着した歯科修復物は、食習慣等によって口腔内で表面着色やプラークが付着することがあるため、患者に対し口腔内の日常清掃を指導すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・高温・多湿、直射日光を避け、水のかからない乾燥した場所に保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051

外国製造業者:HASS CORPORATION (ハスコーポレーション)

外国製造所国:大韓民国