

アンバー ミル Direct

再使用禁止

【禁忌・禁止】

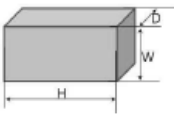
- ・本品又はメタクリル酸系のモノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・本品は再使用禁止。

【形状・構造及び原理】

1) 形状・寸法

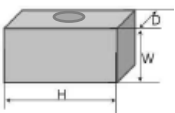
■ Amber Mill Direct

※(ホールなし)

タイプ	W×D×H mm	形状
C12	10×12×15	
C14	12×14×18	
C16	17.5×16×18	

**■ Amber Mill Direct Meso

※(ホールあり)

タイプ	W×D×H mm	形状
C14	12×14×18	
C14	12×14×18	
C16	17.5×16×18	

**2) 色調

タイプ	色調
HT+, HT, LT, MT	W1, W2, W3, W4 A1, A2, A3, A3.5, A4 B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 D2, D3, D4
MO	MO0, MO1, MO2, MO3, MO4

3) 主な原材料

二酸化ケイ素、酸化リチウム、酸化カリウム

4) 原理

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、
歯科セラミックス製補綴物の作製に用いる。

【使用目的又は効果】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、
歯科セラミックス製補綴物の作製に用いる。ただし、歯科用イン
プラント又は歯科用インプラントアバットメントの作製に用いるも
のを除く。

【使用方法等】

- ① 治具を正確な位置に取り付ける。
- ② CAD/CAM 機器に取り付ける。
- ③ 作成したブロックのサイズ情報を CAD/CAM 機器に入力する。
- ④ 加工に必要な補正情報を入力する。
- ⑤ CAD/CAM 機器を使用してブロックを加工する。
- ⑥ 処理済みのブロックを慎重に装置から取り外す。
- ⑦ 加工した人工歯または修復物をブロックから取り外す。
- ⑧ 必要に応じてステイン・グレージング処理を行う。

【使用上の注意】

- ① 製品の着脱の際、CAD/CAM マシンの milling tool を傷つけないように注意すること。
- ② milling tool に手を挟まないように注意すること。
- ③ 治具は正確な位置に取り付けること。
- ④ CAD/CAM マシンの動作中に発生する可能性のあるゴミを抑制または除去すること。
- ⑤ 製品が破損する恐れがあるので、地面に落としたり、強い力を加えたりしないこと。
- ⑥ 乳幼児の手の届かないところに保管すること。
- ⑦ 製品の取り扱いには歯科技工士が行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 汚染の原因となるため、開放的な場所や不衛生な場所に保管しないこと。
- ② 湿気、直射日光、高温を避けて保管すること。
- ③ 一度使用した残りの部分は、再利用・リサイクルしないこと。
- ④ 商品が破損しないよう、適切に梱包・保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL: 092-409-4050 FAX: 092-409-4051

外国製造業者：HASS CORPORATION (ハスコーポレーション)

外国製造所国：大韓民国