

**2025 年 9 月 17 日作成 (第 7 版)
*2025 年 8 月 27 日作成 (第 6 版)

医療機器届出番号 40B1X10003GE0053

歯科材料 (6) 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

インプレッションコーピング

【禁忌・禁止】

- ・併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。

*【形状・構造及び原理等】

トランスファーインプレッションコーピング

トランスファーインプレッションコーピング (6 角タイプ、6 角なしタイプ)



ガイドピン




*トランスファーインプレッションコーピング
[BlueDiamond(BD Octa1)タイプ]



ピックアップインプレッションコーピング


ピックアップインプレッションコーピング (6 角タイプ、6 角なしタイプ)

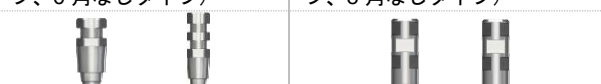

ガイドピン



*ピックアップインプレッションコーピング [BlueDiamond(BD Octa1)タイプ]

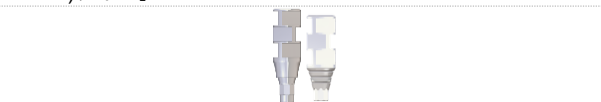

スナップインプレッションコーピング

スナップインプレッションコーピング



スナップインプレッションコーピング (AnyOne タイプ)



*インプレッションシリンダー

*インプレッションシリンダー	*ガイドピン	*ヒーリングキャップスクリュー

【使用目的又は効果】

本品は印象採得に使用する器具である。

【使用方法等】

本品は未滅菌品であるため、使用前にオートクレーブで滅菌を行ってから使用する。
(滅菌条件 温度：132℃、時間：15 分)

1. 本品を用いて印象を採得する。
2. 一般的な方法で印象を採得し、最終補綴物を製作する。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
- ①本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせてください。
- ②本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト（パッチテスト）を行い、問題がないことを確認した後、ご使用下さい。アレルギーテストは皮膚科の専門医にご相談ください。
- ③歯科医師、歯科技工士以外は使用しないでください。ご使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断してください。
- ④本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないでください。
- ⑤本製品は非滅菌状態で出荷しています。使用前にオートクレーブで滅菌を行ってください。
(滅菌条件 温度：132℃、時間：15 分)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

総販売元：株式会社メガジェンジャパン
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3-1-6
TEL：06-6281-3535 FAX：06-6281-3538

外国製造業者：MegaGen Implant Co., Ltd.
(メガジェン インプラント)
外国製造所国：大韓民国