

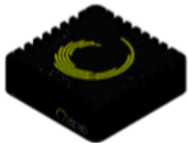
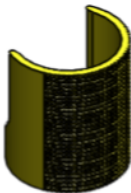
*2025 年 5 月 15 日作成（第 4 版）
**2022 年 3 月 1 日作成（第 3 版）

製造販売届出番号 40B1X10003GE0138

機械器具（58） 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

Full Versah G-Stop™ キット

【形状・構造及び原理等】

	
1. G-ストップ ブロック	2. G-ストップ パーチャル ゲージ
	
3. G-ストップ パーチャル キー	4. C-ガイド スリーブ

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる再使用可能な器具である。

【使用方法等】

- (1) 使用前に器具の滅菌が完了していることを確認する。
- (2) G-ストップパーチャルガイドをドリルに取り付ける。
- (3) G-ストップパーチャルキーを G-ストップパーチャルガイドの上に取り付け使用する。
- (4) C-ガイドスリーブはサージカルガイドに装着し使用する。
- (5) 適切に処置を行う。
- (6) 手術の間、使用済の器具は生理食塩水あるいは蒸留水に浸す。
- (7) 手術後、使用した器具は洗浄のため全てアルコールに浸す。
- (8) 血液や不純物を完全に除去するため蒸留水あるいは流水で洗浄する。
- (9) 乾いた布で拭く、もしくは温風循環器で完全に水分を取り除く。
- (10) オートクレーブ（132℃、15 分）で高圧蒸気滅菌した後、乾燥させ、室温で保管する。

【使用上の注意】

- (1) 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- (2) 変形、損傷（錆、表面キズ、曲り、汚損）等のあるもの、または劣化や異常が見られたときは使用しないこと。
- (3) 長期使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- (4) 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は、使用しないこと。
- (5) 使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- (6) 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
- (7) 洗浄、消毒、滅菌後には、十分に水分を除去して、保管すること。
- (8) 本品は未滅菌品であるため、口腔内で使用する際は、使用前に必ず滅菌すること。
- (9) 器械が正常に作動しなくなるおそれや破損を生じるおそれがあるため、本品を弊社又は総販売元の指定する器械以外と併用しないこと。
- (10) 器械の形態変更や改造等をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて、清潔な場所にて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

総販売元：株式会社メガジェンジャパン
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3-1-6
TEL：06-6281-3535 FAX：06-6281-3538

*外国製造業者：Versah LLC
(パーサ)

*外国製造所国：アメリカ