

器 25 医療用鏡

一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 38819001

単回使用

MEDNOVA ディスポーザブル生検鉗子

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1.再使用禁止

<適用対象（患者）>

1.心肺機能不全、出血や血圧の不安定性、歯槽膿漏、腐食性
食道炎、胃炎、食道憩室の患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】


・形状
(全体図)
タイプⅠ



タイプⅡ



(鉗子カップ)

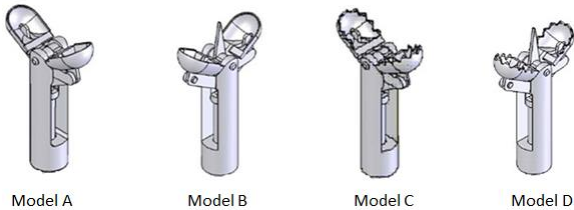

シングルワイヤータイプ

Model A	Model B	Model C	Model D
針なしプレーン	針ありプレーン	針なし鋸歯	針あり鋸歯



ツインワイヤータイプ

Model E	Model F	Model G	Model H
針なしプレーン	針ありプレーン	針なし鋸歯	針あり鋸歯

・寸法
有効長：300、600、730、800、1000、1200、1400、1600、1800、
2000、2300、2700、2800 (mm)
鉗子外径：1.1、1.8、2.4、3.0 (mm)

・原理
柔軟な内視鏡チャンネルを通じて消化管に入り、スライドハンドルを操作して鉗子カップを開閉し、組織サンプルを採取する。

【使用目的又は効果】
本品は、内視鏡とともに使用する器具で、人体の自然開口部を通じて、電気を使用せず消化管内の組織サンプルを採取する。

【使用方法等】

- 内視鏡の補助チャンネルに挿入する。
- 目的の診断部位に挿入する。
- 鉗子カップを病変部位等に向け、ハンドルを前進させて鉗子カップを開く。
- 鉗子カップを目的の組織に合わせ、スプールを引いて鉗子カップを開く。
- 鉗子カップを組織に合わせ、スプールを引いて鉗子カップを閉じる。
- 器具を引き抜いて組織を回収する。

【使用上の注意】

- 包装が開いている場合や破損している場合は使用しないこと。
- 期限切れの場合は使用しないこと。
- 使い捨て滅菌製品であるため、使用後は破棄して再利用しないこと。
- 訓練を受けた臨床医のみが操作すること。
- 使用後は、病院、管理者に従って製品を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法：10～40℃、相対湿度 80%未満の環境で保管する。
有効期限：3 年（滅菌の期限）

【包装】
1 つ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd.
(浙江省創想医学科技株式会社)
外国製造所国：中国