

器 25 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具

単回使用

MEDNOVA ポリリーブ切除スネア

【禁忌・禁止】

<使用方法>

再使用禁止

以下の患者に使用することはできない。


1. 深刻な心臓又は/及び肺疾患を持ち、内視鏡治療に耐えられない患者
2. ポリリーブが 9mm 以上ある患者
3. 組織や臓器に浸透して悪化した癌を持つ患者
4. 治癒力の低下が考えられる糖尿病患者

【形状・構造及び原理等】

- ・形状
(全体図)



(スネアループの形状)

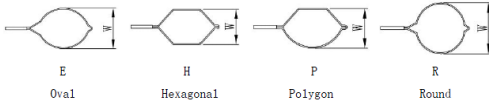

・寸法

最大径：1.8、2.4 (mm)
開口幅：10、15、25 (mm)
有効長：1800、2400 (mm)

・原理

柔軟な内視鏡チャンネルを通じて消化管に入り、スライドハンドルを操作してスネアループを操作し、組織サンプルを採取する。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡とともに使用する器具で、人体の自然開口部を通じて、電気を使用せず消化管内の組織サンプルを採取する。

【使用方法等】

1. ハンドルを引き、スネアループがチューブの内側にあることを確認する。
2. 内視鏡でポリリーブが見える場合は、内視鏡の作業チャンネルにスネアを挿入する。
3. スネア ループを延長し、除去するポリリーブの周りに配置する。
4. 親指のリングを引いてポリリーブを取り除く。
5. ポリリーブの切除が完了したら、スネアループを外側のチューブに収縮させ、内視鏡から装置を取り外す。
6. ポリリーブを回収する。
7. 処置が終了したら、生物学的に有毒な医療廃棄物に関する機関のガイドラインに従って、装置を廃棄する。

【使用上の注意】

1. パッケージが開封されていたり、破損したりしている場合には使用しない。
2. 使用前に、取扱説明書をよく読むこと。
3. 使用する前に、ねじれや破損がないことを確認し、異常が見つかった場合は使用しないこと。
4. 処置は、直接内視鏡的可視化の下で行うこと。
5. 他の目的の用途に使用しないこと。
6. 使用後は、各地域や病院等のガイドラインに従って廃棄する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：10℃～40℃、相対湿度 80%未満の環境で保管する。
有効期限：3 年（滅菌の期限）

【包装】

1 つ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd.
(浙江省創想医学科技株式会社)

外国製造所国：中国