

機械器具 02 医療用照明器
一般医療機器 汎用歯科用照明器 12351000

デンティス LUVIS C500

【禁忌・禁止】

1. 本製品を他の機器と隣接又は積み重ねて使用しないこと。[不適切な動作を引き起こす可能性がある。]
2. 指定の付属品、ケーブル以外を使用しないこと [電磁波強度の増加の可能性がある。]
3. 光源 (LED) を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

・ライトヘッド




・チェアタイプ



1: セカンドアーム

2: ファーストアーム

・ウォールタイプ

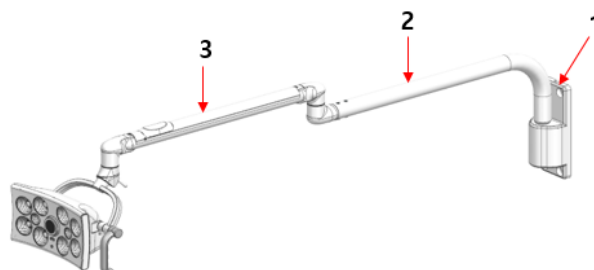


1: ウォールブラケット

2: セカンドアーム

3: ファーストメインアーム

・シーリングタイプ

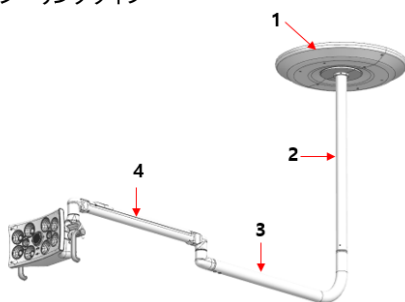


1: シーリングカバー

2: シーリング垂直アーム

3: セカンドアーム

4: ファーストアーム

・モバイルタイプ

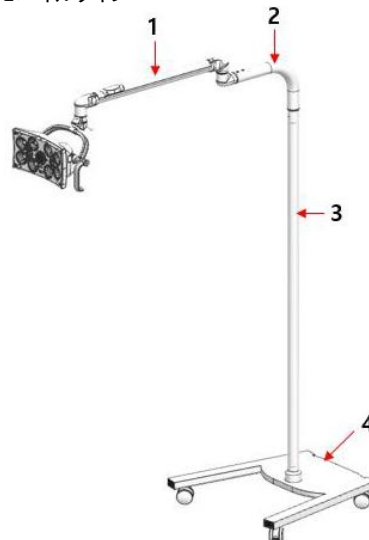

1: ウォールブラケット

2: セカンドアーム

3: モバイル垂直アーム

4: モバイルベース

取扱説明書を必ずご参照ください。

2.電気定格

アダプタなし	AC12-24V、50/60 Hz、21VA
アダプタあり	ヘッド:DC15V、1.5A AC/DC アダプタ -入力:100-240V、50/60Hz、1.6-0.7A -出力:DC15V、4.34A

【使用目的又は効果】

本品は、歯科手術、検査、処置部(通常、口腔)を集中的に照明する一般歯科用の専用照明器である。

【使用方法等】

1.使用方法

使用方法については、取扱説明書を熟読すること。

- 1) リモートコントローラー又はヘッドコントローラーにて電源を入れる。
- 2) 処置部を集中的に照明できるように、サイドハンドルを持って適切な位置にライトヘッド部を動かす。
- 3) スイッチを操作しライトを点灯させる。
- 4) 照射調節ダイヤル又はリモートコントローラーにて明るさを調整する。ダイヤルの場合、時計回りに回転させると明るさが上がり、反時計回りに回転させると明るさが下がる。
- 5) 使用後、スイッチを操作して消灯させる。

2.清掃方法

- 1) 清掃する前に電源を切り、ライトヘッドが十分に冷めるまで待つ。
- 2) 清掃、消毒を行う際は、手袋を着用する。
- 3) メーカー使用説明書に従い、洗浄剤と消毒剤を用意する。
- 4) 洗浄剤を浸した布で対象部分を清掃する。
- 5) きれいな水に浸した布でデバイスを清掃する。
- 6) すべての表面を清潔で乾いた布で拭き、残留物を取り除く。

【保守・点検に係る事項】

メンテナンスは毎年実行すること。

＜点検事項＞

- ・塗装の欠陥
- ・プラスチックのひび割れ
- ・部品の緩み
- ・サスペンションの回転性/リミットストップ及び変形
- ・ライトヘッドとアーム等の接続
- ・ライトヘッドの正常な動作

故障又は損傷が発生した場合は、販売店に連絡すること。

【使用上の注意】

1. 電源の設置と接続は、認定のサービス代理店もしくは電気技師のみが行うこと。
2. 電源を入れる前に、全ての電気接続の極性を確認すること。
3. 光源(LED)を直視しないこと。
4. 2つ以上のボタンを同時に押さないこと。
5. 本製品に異常な動作が発生した場合は、使用を中止し販売店に連絡すること。
6. 性情に動作する機器のみを使用すること。
7. 汚染を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:

温度:0~40℃

湿度:30~90%

寿命:

LED:60,000 時間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者:株式会社ジオメディ

連絡先:092-409-4050

外国製造業者:Dentis Co., Ltd. (デンティス)

外国製造業者国名:大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。