

*2026 年 6 月 3 日作成（新様式第 2 版）
2026 年 5 月 18 日作成（新様式第 1 版）


製造販売届出番号 40B1X10003GE0247

機械器具（70）歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器 70755000

デンティス SQUVA

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

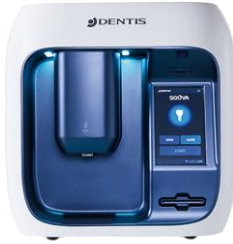

2. 構成

- ・本体
- ・ジグ
- ・電源コード
- ・アダプター

3. 仕様

項目	仕様
寸法（W×H×D）	W336×L185×H330（mm）
重さ	6 kg
消費電力	170W
電圧定格	AC100-240V, 50/60Hz
アダプター出力	DC24V, 250W

* 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用金属の表面処理を行う装置である。
歯科補綴の歯科用金属に適用し、表面処理を行うことで、
その接着性や親水性を高めることができる。

【使用方法等】

1. アダプター、電源コード、本体を接続する。
2. 本体背面の電源スイッチを入れる。
3. RFID CARD を挿入する。
4. LCD 画面が点灯することを確認し、OPEN ボタンを押す。
5. ホルダーをトレー中央の溝に設置する。（フィクスチャやアバットメント等の歯科用インプラント材や滅菌品には使用しないこと。）
6. START ボタンを押して処理を開始させる。
7. 動作が完了したらホルダーを取り外す。
8. CLOSE ボタンを押してトレーを閉じる。

【使用上の注意】

1. 表面処理する製品は、乾燥した状態で処理すること。
2. 床面が不安定な場所、傾斜のある場所、または振動のある場所では使用しないこと。
3. 本体の背面および左右には、5cm 以上の空間を確保して設置すること。
4. 劣化や異常が見られる場合は使用しないこと。
5. 清掃の際は、アルコール以外の有機溶剤や塩素系クリーナーを使用しないこと。また、清掃前に電源が OFF になっていることを確認すること。
6. 本製品は、取扱説明書を熟読したうえで使用すること。
7. 本製品は、換気可能な場所に設置すること。
8. 本製品は、水気や湿気の多い場所では使用しないこと。
9. トレーが下降する位置には物を置かないこと。
10. 本製品を使用目的以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 長期間使用していなかった本製品を使用する場合は、動作確認を行ったうえで使用すること。
2. 長時間使用しない場合は、トレーを閉じた状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて保管すること。
3. 故障が発生した場合は、有資格者・専門家以外は修理を行わないこと。
4. 故障発生時には、閉じた状態のトレーを無理に開けず、購入先へ問い合わせること。
5. 製品を廃棄する際は、法令等に従って処理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社ジオメディ
連絡先：092-409-4050
外国製造業者：Dentis Co., Ltd.（デンティス）
外国製造業者国名：大韓民国