

ペルビッキー Pelvicky

【警告】


1. 本品の使用前に、この添付文書のすべてを熟読すること。

【禁忌・禁止】

- 以下の場合には使用しないこと。
- ・大転子(骨盤)部分以外には当てないこと。
(腰部に当てないこと)
 - ・子供には使用しないこと。
 - ・医師が不適当と判断した場合。

**【形状、構造および原理等】

1. 形状、構造
本品の形状及び構成・サイズ等は下記の通りです。

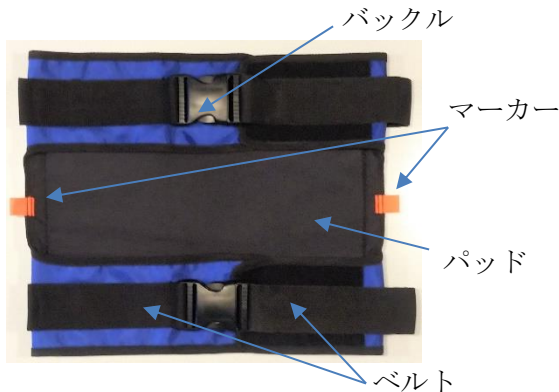

品番(色)	PV-01(ブルー)	PV-02(グリーン)
全体長さ	約 150cm	約 125cm
パッド部分長さ	約 87cm	約 70cm
対応臀部サイズ	約 83～128cm	約 68～103cm
重 量	約 380g	約 320g

*【使用目的、効能又は、効果】

損傷した或いは損傷の疑いのある骨盤部分に製品を装着し、骨盤を固定する。

**【操作方法または使用方法】

- 1) 患者の臀部周辺の異物(ポケット中身など)を取り除き、何も無い状態を確認する。ペルビッキーの黒い面を上にして、患者の臀部下に差し込む。
- 2) 大転子部にオレンジ色のマーカーを合わせる。バックル差込を受口に入れる。上下共にカチッと音が鳴るまで差し込み、確実に固定されている事を目視で確認する。
- 3) 左右のベルトを掴み、引っ張る。(2人で左右から同じ力で引っ張る事が望ましい)
- 4) 3)の引っ張った状態で、マジックテープ側のベルトを引っ張りながら、表面にしっかり押さえつけ留める。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 再使用に際しては、必ず洗浄する。
 - 2) レントゲン撮影、MRI 検査も装着したまま行うことができる。
 - 3) ペルビッキーを外す際は医師の指示に従いゆっくりと外す。
2. その他の注意
 - 1) 本品に破損、変形、汚染等がある場合は使用しないこと。
 - 2) 丁寧に取扱い、必要以上の力を掛けないこと。
 - 3) 損傷を与えるような他の材料や機械類との接触を避けること。
 - 4) 温水、漂白剤等は使用しないこと。
 - 5) 洗濯後は完全に乾燥させてから使用すること。
 - 6) 高圧蒸気滅菌器は使用しないこと。
 - 7) 繰り返し使用できるが消耗品のため、血液等の汚れや落ちない汚れ、劣化がある場合は新品と交換すること。

【貯蔵・保管方法および使用期限等】

1. 本製品を保管する際は、高温・多湿を避けると同時に、塵や埃の無い清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は避けること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【包装】 1 個/袋

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄後は影干しでよく乾燥させること。
2. 損傷を受けた製品は洗浄しても除去しきれない生体組織の付着、あるいは変形や傷などの可能性があるため再使用せずに廃棄すること。

*【製造販売業者および製造業者】

製造販売業者:JMR株式会社

〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原 3061

TEL:0256-77-8808 FAX:0256-77-8809

E-mail: info@jmr-lab.com