



シカゴ東京メディカル株式会社

類 別：器 13  
 一般的名称：機械式聴診器（一般医療機器、クラス I）  
 ウルトラスコープ

## 【警告】

イヤークリップが耳管に確実に装着されていることを確かめてから使用すること[外れているとステンレスパイプにより使用者の耳に傷害をきたす恐れがあるため]。

## 【形状・構造等】※

・本品は皮膚に直接接触して生体音を拾うヘッド(チェストピース)部 ①と Y チューブ②で連結される耳管 ③ (イヤークリップ及びバネを含む) から構成される聴診器である。(下図 1 参照)


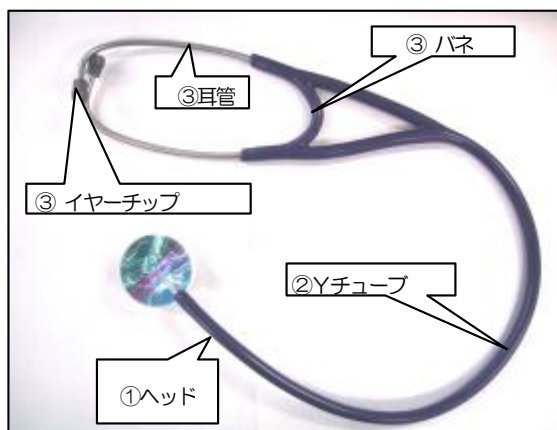


図 1：1166・1169・1186

注) ヘッドはモデルによって以下のように異なる。

| 番号 | モデル<br>番号 | ヘッド  |
|----|-----------|------|
| ①  | 1166      | 成人用  |
| ②  | 1169      | 小児用  |
| ③  | 1168      | 乳幼児用 |

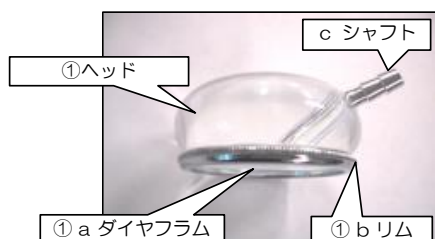

| モデル       | ヘッド |                    | Y チューブ                | 用途              |
|-----------|-----|--------------------|-----------------------|-----------------|
|           | 数   | タイプ                |                       |                 |
| 1166      | 1   | 成人用                | 1 本 (1 連)             | 成人用             |
| 1169      | 1   | 小児用                | 1 本 (1 連)             | 小児用             |
| 1168      | 1   | 乳幼児用               | 1 本 (1 連)             | 乳幼児用            |
| 1166-CA   | 1   | 成人用                | 1 本 (2 連)             | 成人用             |
| 1166-CP   | 1   | 小児用                | 1 本 (2 連)             | 小児用             |
| 1166-TA   | 1   | 成人用                | 2 本 (1 連)             | ティーチング・教育 (成人用) |
| 1166-TP   | 1   | 小児用                | 2 本 (1 連)             | ティーチング・教育 (小児用) |
| 1166-Duo  | 2   | 成人・小児・乳幼児から 2 個選択可 | 1 本 (1 連、取替アダプター付き)   | ヘッド交換可          |
| 1166-Trio | 3   | 成人・小児・乳幼児から 3 個選択可 | 1 本 (1 連、取替アダプター付き)   | ヘッド交換可          |
| Maxi      | 1   | 成人用                | 1 本 (1 連)             | 成人用 (単色デザイン)    |
| 1166-XL   | 1   | 成人用                | 1 本 (1 連、延長部分アダプター付き) | 長いチューブ対応 (成人用)  |
| 1169-XL   | 1   | 小児用                | 1 本 (1 連、延長部分アダプター付き) | 長いチューブ対応 (小児用)  |
| 1168-XL   | 1   | 乳幼児用               | 1 本 (1 連、延長部分アダプター付き) | 長いチューブ対応 (乳幼児用) |

## 1166-CA・1166-CP (2 連チューブ)



1166-TA・1166-TP



1166-Duo・1166-Trio



成人用・小児用・乳幼児用ヘッド

Maxi



1166-XL・1169-XL・1168-XL



【性能、使用目的、効果・効能】

生体音を直接聴診するための聴診器である。

【操作方法又は使用方法等】

イヤーチップを耳に装着し、ダイヤフラムを患者の胸部などにあて生体音を聴く（心音・肺音など）。軽く当てれば低周波帯域（心音）を聴く。少し強めに宛てれば、高周波帯域（肺音）を聴く。

【使用上の注意】※

1. ヘッドのダイヤフラムやリム部に傷、破損のあるものは人体の皮膚を傷つけたり聴診に支障をきたすおそれがあるので使用しないこと。
2. 本品の性能、使用目的、効果又は効能以外の目的で使用しないこと。
3. 万一、使用中に本品に異常を認めた場合は直ちに使用を中止すること。

【作動・動作原理】

ダイヤフラムの振動がYチューブを通して耳に伝えられる。

【貯蔵方法】

常温・常湿

【取り扱い上の注意】

1. 極度の高温、低温又は高湿の場所での保管は避けること。
2. 溶剤やオイルが近くにある場所での保管は避けること。
3. 完全に洗浄するときは、イヤーチップを耳管から外して行うこと。
4. 薬液やオートクレープで滅菌をしないこと。
5. 本品を振り回すなど、乱暴な取扱いはしないこと。
6. 本品は子供の手の届かないところに保存すること。

【保守・点検等】

1. チェストピース部を清潔に保つため、リムを緩めて振動板を取り外してから、各部品を石鹼水または消毒用アルコールで清拭すること。各部品は十分乾燥させてから組み立てること。
2. 耳管とYチューブも、石鹼水又は消毒用アルコールで清拭すること。なお、イヤーチップも取り外して、隅々まで拭きとること。

【包装】

1 個/1 箱

\*【製造販売業者】

製造販売業者名：  
シカゴ東京メディカル株式会社  
住所：  
長野県茅野市米沢4 1 7 5 番地 1