


器 22 検眼用器具

一般医療機器 瞳孔計 13236000（JMDNコード）

【ペンライト】

【形状、構造及び原理等】

1. 形状
ペンライト型の瞳孔計。
- 2 種類のカラーバリエーションがある。
寸法 13 cm x 1.3 cm

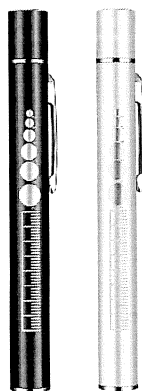

2. 構造
LED ライト内臓のペンライト側面に瞳孔の大きさを示す円（瞳孔計）が表示される。
ペンライトの逆側に USB の充電口がある。

3. 原理
LED ライトにより患者の瞳孔の大きさを観測し、側面の円と比較することで計測する。

【使用目的又は効果】

本品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具である。

【使用方法等】

- 1) 使用前に洗浄・消毒をする。
- 2) 本製品を瞳孔に近づけて瞳孔の大きさを対比的に観測して測定する。
- 3) 本体の側面にスイッチがあり、押しながらLEDライト方面に移動すると白光、逆側に移動すると黄光のLED ライトが点灯する。
- 4) 計測を終了し側面のスイッチを押して真ん中に戻しLED ライトを消灯する。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に汚れ、破損等を点検すること。
- ・ 劣化が認められた場合は使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 高温、多湿の環境を避けて保管すること。
- ・ 長期間使用しない場合は電池を抜いておくこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 シーアンドケイ

住所：東京都葛飾区堀切八丁目24番12号

製造業者：Suzhou Changtu Network Technology Co., Ltd

（すうぞう ちゃんとうー ねっとわーく てくのろじー かんぱにー りみて っど）

製造国：中華人民共和国