

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000（JMDNコード）
コンプレッサー式ネブライザー CDC300S

【警告】

1. 本品を使用する際は必ず医師の指導に従うこと。
2. 薬液の種類、用量、用法については、必ず医師の指導に従うこと。[症状悪化の恐れがある]
3. 本体、マウスピース、マスクは、使用後に必ず洗浄・消毒すること。洗浄・消毒後は、速やかに乾燥させ、汚染を防ぐこと。[雑菌の繁殖、感染の恐れがある]
4. 本品を複数の患者が共有する場合は、必ず使用する患者ごとに本体、マウスピース、マスクを使用すること。[感染の恐れがある]

【禁忌・禁止】

1. 本品を改造しないこと。[感電、漏電、感電の原因となります。]
2. 自動呼吸装置に本品を接続しないこと。
3. 薬液消毒は行わないこと。[消毒液が残ったまま吸入すると、症状の悪化のおそれがあります。]
4. 次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液で消毒しないこと。[錆びの原因となる]
5. 水の吸入はしないこと。[症状悪化の恐れがある]

【形状、構造及び原理等】
1. 外観形状・構造
 パッケージ構成


1. 本体



2. 薬液ボトル



3. 大人用マスク



4. 子ども用マスク



5. マウスピース



6. エアチューブ



7. エアフィルター x5



8. DC アダプター

2. 原理

コンプレッサーで発生させた圧縮空気をネブライザ内部のノズルから吐出させる際、ノズル部と給水管の間に負圧が生じ、薬液等が吸い上げられる。吸い上げられた薬液等は、上部のバッフルに衝突し、ベンチュリ効果により細かな霧となって外部に噴出する。

【使用目的又は効果】

水又は医薬品を非加熱的にエアロゾル化し供給するために用いられる。主に慢性閉塞性肺疾患、咳嗽（咳）、喘息、気管支炎、鼻炎、慢性咽頭炎、へんとう炎、風邪、発熱等の呼吸療法に用いる装置です。

【使用方法等】**1. 電源の準備**

DC アダプターをメインユニットの DC ジャックに接続し、電源コンセントに接続してください。

**2. 薬液ボトルに注入**

マウスピースまたはマスクを薬液ボトルから持ち上げて、ネブライザの上部シェルのネジを外します。



ネブライザの下部シェルに正しい量の薬を注入する。

**3. 薬液ボトルの組み立て**


ステップ 1：ネブライザー上部シェルをネブライザー下部シェルに時計回りにねじ込みます。



ステップ 2：希望する吸入アクセサリを組み立てます。



マウスピースの組み立て

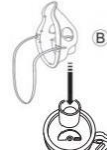

マスクの組み立て

4. エアチューブの組み立て

ステップ 1：エアチューブプラグをねじり、コンプレッサーのエアチューブコネクタにしっかりと押し込む。

ステップ 2：エアチューブのプラグを少しねじり、薬液ボトルの底にしっかりと押し込んでください。

薬液ボトルホルダーを薬液ボトルの一時的なホルダーとして使用してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

使い方

1. 図のように薬液ボトルを持つ



正しい姿勢

2. タッチ操作でオン／オフ



10 分/20 分/30 分 タイミング機能：タイマー機能付き、必要な時間だけ運転できます。

*8cc の薬液は 30±5 分の噴霧時間を提供します。

*6cc の薬液は 20±3 分の噴霧時間を提供します。

*3cc の薬液は 20±3 分の噴霧時間を提供します。

3. 医師の指示に従って薬剤を吸入する

吸入アクセサリーの違いは以下の通りです。



マウスピース

マウスピースを口に挿入します。薬を吸入する普通に吸入します。マウスピースから普通に息を吐きます。



マスク

ストラップを頭にかけます。ストラップをゆっくりと引っ張りマスクを鼻と口にかけます。薬を吸入します。

4. エアチューブを薬液カップから外す
エアチューブプラグを持ち、静かに引き下げます。
エアチューブに結露や水分が残っていないことを確認してください。
エアチューブに結露や水分が残っている場合は、エアチューブから水分を取り除いてください。

5. コンプレッサーからエアチューブを外します。
エアチューブプラグを持ち、コンプレッサーの上側にあるエアチューブコネクターからエアチューブプラグを静かに引き抜きます。

6. DC アダプターをコンセントから抜く
DC アダプターを本体のコンセントと DC ジャックから抜く。

使用後は清掃して、消毒を行ってください。

【保管方法及び有効期間等】

①貯蔵・保管環境

温度：-20℃～60℃

湿度：30～80%RH

②保管場所については次の事項に注意してください。

- 1) 非腐食性ガス、良好な換気、高温、多湿、直射日光を避けてください。
- 2) 監視されていない乳幼児や子供の手の届かないところにデバイスを保管してください。
- 3) 洗浄後すぐに部品を乾燥させてください。
- 4) 清潔で安全な場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後の点検を励行し、異常が認められたときには、メーカーに点検依頼をしてください。
2. 使用後は、部品を消毒・乾燥し、ちりやほこりが入らないように清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 シーアンドケイ

住所：東京都葛飾区堀切八丁目 2 4 番 1 2 号

製造業者：Wuhan hengguangli Hardware Building Materials Co., Ltd

（ぶかん ほんぐあんり はーどうえあ びるでいんぐ まてりあるず かんぱにー りみてっど）

製造国：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。