

機械器具(*48) *注射筒

一般医療機器 *家庭用精液注入用シリンジ JMDNコード：*64137001

再使用禁止

*妊活セット ME087

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。


【形状・構造及び原理等】

形状・構造

本品は、下記の原材料で作られている。

原材料

名称	成分
カテーテル	シリコン
シリンジ	ポリプロピレン

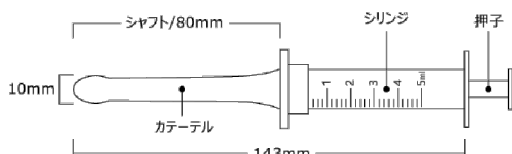

【使用目的又は効果】

- 1.本品は膈内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。
- 2.本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 1)本品1回の使用。まず、採精容器を取り出す。
- 2)採精容器に精液を採取する。
- 3)採取した精液をカテーテル先端よりシリンジの押子を引いて吸引する。
- 4)カテーテルを膈に挿入して、シリンジの押子を押し精液を注入する。
- 5)注入後、速やかにカテーテルとシリンジを外さずに膈から抜く。
- 6)精液の注入後は、リラックスできる体勢で、安静にする。

【使用上の注意】

- 1.本品は使用直前に開封すること。
- 2.本品の使用より発疹、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が認められた場合には、使用を中止し、医師に相談すること。
- 3.痛みを感じる場合は、無理に使用せず使用を中止すること。使用中後も痛みが続く場合は専門医の診察を受けること。
- 4.本品は一回使い切り。再利用はせず使用後は必ず破棄すること。
- 5.膈内の創傷の原因になるため、以下の事項は行わないこと。
 - (1)本品に対して曲げ、切削、加圧等
 - (2)粗雑な取り扱い（傷をつける、落下させる、強い衝撃を与える）

- 6.シリンジと押子は本品に同封されたものを使用し、本品以外のシリンジ・押子を使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：

- ・涼しく乾燥した場所に保管する。

有効期限：

- ・未開封品の保存期間：5年

注意：使い捨て品、二次使用不可。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町1 1 1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)

使用前に必ずご参照下さい。