

器55 医療用洗浄器
一般医療機器 一般的名称：鼻用洗浄器 JMDN コード：41599000

鼻用洗浄器ME117

【禁忌・禁止】

以下の患者に使用しないこと。
・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。
・口腔咽頭部損傷または外科手術を受けたばかりの場合は使用しないこと。
・鼻や耳に出血や外傷、外耳道炎等の疾患がある場合は使用しないこと。〔症状が悪化するおそれがある〕。


【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉(原材料)

本品の構成品と付属品は基本的に下記の通り。

No.	名称	数量
構成品	電動鼻用洗浄器	1台
付属品	ノズル	2個
付属品	充電用ケーブル	1本

各部の名称と材質は下記の通り。

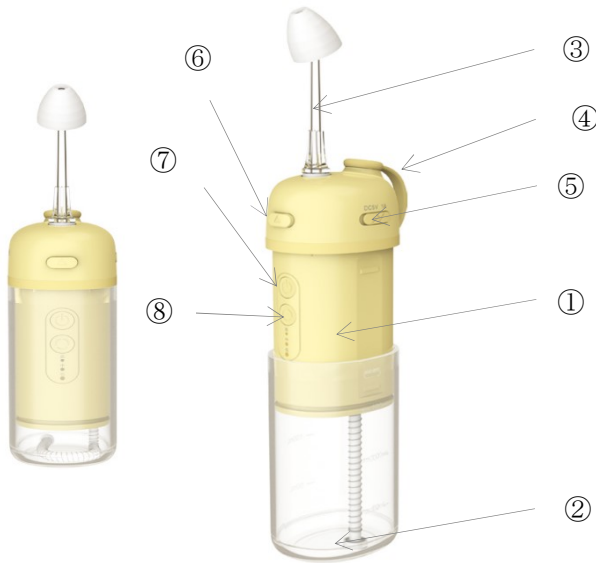

No.	名称	材質
①	製品本体	ABS
②	ウォータータンク	ABS
③	ノズル	ABS+シリコン
④	水注ぐ口用掛け縄	TPU
⑤	充電差込み口	シリコン
⑥	ノズルロック用ボタン	ABS
⑦	電源ボタン	ABS
⑧	モードボタン	ABS

原理：本品は、ウォータータンク内に注入した洗浄水を通して鼻腔内に噴出して、鼻腔内の埃、雑菌等の除去の為の鼻用洗浄器であること。

【使用目的又は効果】

本品は、洗浄液を直接鼻腔に適用するために用いる器具である。
鼻の内腔から注入し、粘膜及び鼻の通路を洗浄及び治療する生理食塩水等の洗浄液を充填し、噴霧する器具である。

【使用方法等】

1. 初回使用前の洗浄と消毒
- (1) ノズルとウォータータンクを洗浄して消毒する。
- ・洗浄：ノズルとウォータータンクを取り外して、推奨水温(15℃～30℃)で手洗いする。
 - ・消毒：純水（90℃）をウォータータンクに入れて 5 分そのまま放置してから水を捨てる。純水でノズルを洗い流し、乾かす。ノズルは純水に浸けないこと。
- (2) 充電ケーブルを充電差込口に差し込み、フルー充電させる。
- ※充電時使用不可。
2. 使用
- (1) ノズルをノズル挿入口に「カダー」までの音が聞こえるまで、ノズルを差込む。
- (2) 水注ぐ口の蓋を開けてからウォータータンクを下方方向に引いて、洗浄水を注ぎ込む。
- ※塩水を注ぎ込む時、洗浄器の電源がオフ状態を確保する。
- (3) 電源ボタンを押して電源が入る。モードボタンを押してモードを選択できる。
- (4) 洗浄する時、声を出さず、口で呼吸しながら、ゆっくりとノズルを鼻孔に合わせる。
- 洗浄水を一方の鼻孔から入れ、もう一方の鼻孔から出す。右の鼻孔を洗浄する場合は、頭を左に傾ける。
3. 使用後
- (1) 電源ボタンを押すと、電源オフになる。ウォータータンクに残留している洗浄水を捨てる。清水 150ml を入れて、電源が入り、清水が使い切られるまでそのままにする。機器内部に残った塩水が腐食を引き起こすのを防ぐことができる。
- (2) 使用したノズルを適時に洗浄と消毒し、徹底的に乾かした後、ノズルを本体にセットして、他の部品と一緒に包装箱に入れる。

【使用上の注意】

- （１）子供は保護者の指示のもとで使用するこ
- （２）交差感染を防止する為に、他の人と共用しないこと。
- （３）本品を使用中に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- （４）シャワーやお風呂に入る時に使用しないこと。[感電の原因になる。]
- （５）手が濡れ状態で充電ケーブルを抜かないこと。
- （６）本品の使用前後は必ず洗浄をすること。[交差感染を防ぐため。]
- （７）本品は屋内での使用を意図しているため、屋外で使用しないこと。[有害事象の発生につながる恐れがある。]
- （８）清潔で風通しが良く、断熱、防湿、防塵、有毒ガスや腐食性のない環境で使用するこ

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

涼しく換気の良い倉庫で保管し、腐食性のある品物と一緒に置かないこと。
過圧がなく、地面から 200mm 以上の高さに置くこと。

〈耐用期間〉

本体の有効期間:3 年 [自己認証（当社データ）による]
保証期間：1 年

【使用者による保守点検事項】

・ノズルの交換時期の目安：3 ヶ月
バッテリーは交換できないため不具合等が生じた場合は販売業者へお問い合わせください。

【保守・点検に係る事項】

使用後は、ノズルと吸水管を洗浄すること。
ウォータータンクは、毎回使用後に空にすること。
※詳しい使用方法及び保守方法等は取扱説明書でご確認ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社
東京都新宿区矢来町111
TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.
(中華人民共和国：China)