

器55 医療用洗浄器

一般医療機器：鼻用洗浄器 JMDN コード：41599000

電動鼻用洗浄器 ME129

【警告】

〈使用方法〉

- 1.本品に無理な圧力をかけないこと、水没させないこと。
(バッテリーが破裂・発火する恐れがある為)
- 2.本品は原則として同一患者使用のため、他の患者に使用しない。

【禁忌・禁止】


以下の患者に使用しないこと。

- ・目、耳、口腔には使用しないこと。
 - ・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。
 - ・口腔咽頭部損傷または外科手術を受けたばかりの場合は使用しないこと。
 - ・鼻腔内に創傷がある場合及び塩化ナトリウム代謝障害者と、アレルギー体質がある場合は医師に相談の上、使用すること。
- ◎小児が使用される際
- ・保護者の指導の下で使用する。
 - ・鼻を充分にかめない場合は使用しないこと。
 - ・風邪や鼻づまりがひどい時は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉(原材料)

本品は洗浄器本体、ウォータータンク、ノズル部分、上蓋を構成されている。

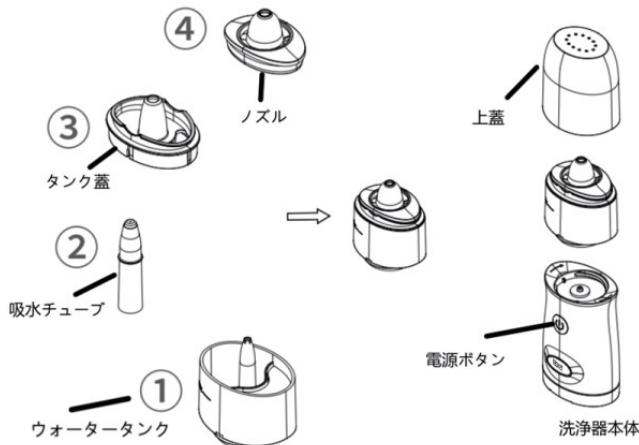

洗浄器本体：ABS樹脂<ABS>
ウォータータンク：医療レベルポリプロピレン<PP>
給水チューブ：医療レベルポリプロピレン<PP>
タンク蓋：医療レベルポリプロピレン<PP>
ノズル：熱可塑性ポリウレタン<TPU>
上蓋：医療レベルポリプロピレン<PP>

原理：本品は、モーターの回転でポンプを動かし、タンク内の洗浄液を吸い上げる。

吸い上げた洗浄液はノズルを通して噴出させる。

【保管方法及び有効期間等】

【使用目的又は効果】

鼻腔内部および鼻腔奥を洗浄し、鼻の機能を改善するための洗浄器である。花粉症の緩和、アレルギー性鼻炎の緩和、風邪の予防と軽減に役立つ。一般家庭向けに設計されている。

【使用方法等】

使用前

- ・底面の電池カバーを開け、単 3 形乾電池 2 本を正しい極性で挿入してください（電池室の近くに極性の表示がある）。電池カバーを閉めてください。
- ・生理食塩水または専用洗浄液（MAX：25mL）をウォータータンクに注入してください。

使用中

- ・製品を軽く持ち上げ、ノズル先端を片方の鼻孔に合わせてください。電源ボタンを押して洗浄を開始し、口で呼吸しながら「アー」と声を出してください。
- ・洗液は同じ側の鼻孔から流れ出て、自動的に廃液タンクに回収されます。
- ・片方の洗浄が終了したら、同じ方法でもう一方の鼻腔を洗浄してください。

使用後

- ・電源ボタンを押して製品をオフにしてください。
- ・ウォータータンクに残った生理食塩水を捨ててください。
- ・ウォータータンクを本体から外し、水洗いしてください。

【使用上の注意】

- ・初回使用時または長期間保管後は、まず清水で洗浄してから使用してください。
- ・ノズルは個人専用とし、共用を避けてください。
- ・使用前に電池カバーがしっかり閉まっていることを確認してください。
- ・水分の侵入による故障を防ぐ。
- ・洗浄液には 0.9%の生理食塩水を使用するか、医師の指導に従って適切な洗浄液を選択してください。
- ・片方の鼻腔に 10～15mL を使用することを推奨します。個人の状態や医師の指示に応じて量を調整してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は、ノズルと吸水管を洗浄すること。
- ・ウォータータンクは、毎回使用後に空にすること。

※詳しい使用方法及び保守点検等は取扱説明書で確認してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

〈保管方法〉

環境温度：-10℃～ 55℃、

相対湿度：≤90%

大気圧：70 ～ 106 kPa〈耐用期間〉

〈有効期間〉

標準的な耐用期間: 1 年 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.

(中華人民共和国：China)

取扱説明書を必ずご参照ください。