

**2026年6月（第3版）
*2026年5月（第2版）

届出番号：13B2X10479302056

器 52 医療用拡張器
一般医療機器 医療用拡張器 JMDN コード：70969001

巻き爪矯正器具 ME137

【禁忌・禁止】

- ・爪に割れや亀裂などがある方、また爪が極端に薄いまたは弱い方は使用しないでください。
- ・爪の周辺に化膿、炎症、湿疹など皮膚に異常がある方は使用しないでください。
- ・本品やその構成材料に対し、アレルギー-または過敏症のある方は使用しないでください。
- ・重篤な糖尿病や重度の血行障害のある方は使用を避けてください。


【形状・構造及び原理等】

本品の構成品と付属品は基本的に下記の通り。


No.	名称	数量
構成品	巻き爪矯正器具	<u>**2個入り/サイズ選択可</u>
付属品	ステンレス製ピンセット	1個
付属品	装着補助クリップ	1個

*※巻き爪矯正器具は単品流通する場合がある。

各部の名称と材質は下記の通り。

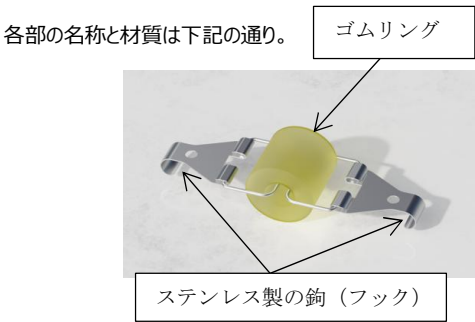

材質：本体 鉤（フック）部分：ステンレス製
弾性機構部：高弾性ゴムリング

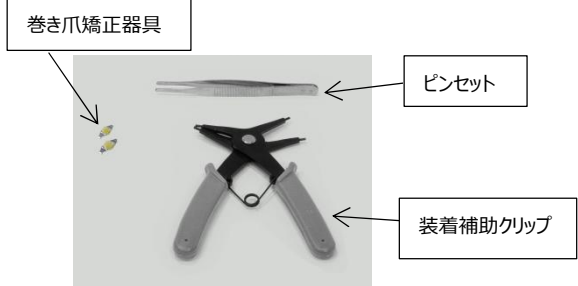

原理：

巻き爪の両端にステンレス製の鉤（フック）を装着し、高弾性医療用ゴムリングが持続的かつ均一な水平収縮力を発生させる。
この力が巻き込んだ爪を両側から平らに引き伸ばし、正常な成長方向へと矯正し、痛みを緩和するとともに、再発を防止する。

【使用目的又は効果】

- ・物理的な牽引により、巻き爪を矯正
- ・食い込みによる痛みを和らげる
- ・爪周囲炎（そうしゅういえん）の予防・再発防止

【使用方法】

- ①装着補助クリップのハンドルを握り、クリップの自然に開いている側の先端を閉じた状にする。
- ②クリップの先端に矯正器具を取り付けてから力を緩める。
- ③ステンレス製の鉤（フック）の位置をあらかじめ調整する。
- ④爪の片側に、鉤（フック）をしっかり引っ掛ける。
- ⑤もう片方の鉤（フック）も爪にしっかり引っ掛ける。
- ⑥クリップのハンドルを握り、取り出す。
- ⑦ピンセットで鉤（フック）の位置を微調整し、適切な位置に調整する。

【使用上の注意】

- ①本品は軽度から中度の巻き爪を対象としている。爪の食い込みがきつい方や重度の巻き爪の方は鉤（フック）が引っかからない場合がある。
- ②使用開始時は、1日1～2時間程度から装着し、痛みや不快感がないことを確認する。問題がなければ、装着時間を徐々に延ばしていく。
- ③使用中や使用後に痛み、発疹、痒み、赤み、うっ血等の異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ④本品及び付属品を本来の目的以外に使用したり、改造して使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前に、本品に異常がないか必ず確認すること。

【保管方法及び使用期限等】

- ・本品及び付属品を幼児や小児の手の届かない場所で保管する。
- ・直射日光、高温多湿を避け、室温で保管する。
- ・製品の手入れには中性洗剤を用い、シンナーなどの強い溶剤は使用しない。
- ・衛生面および矯正効果の維持するため、使用推奨期間は装着後30日間である。定期的に新しい製品と交換する。

使用後の改善期間には個人差があり、一般的には1～2ヶ月を目安としている。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社
東京都新宿区矢来町 1 1 1
TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.
(中華人民共和国：China)

取扱説明書等を必ずご参照下さい。