

器55 医療用洗浄器

一般医療機器 一般的名称：家庭用鼻腔洗浄器 JMDN コード：71122001

ノーズリフレPlus鼻用洗浄器 ME149

【禁忌・禁止】

以下の患者に使用しないこと。

- ・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。
- ・風邪をひいている時は中耳炎を起こす可能性があるので使用しないこと。
- ・鼻づまりがひどい時や耳に疾患のある際は、医師と相談の上、使用すること。
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止してください。
- ・洗浄後に鼻をかむ必要があるため、鼻をかむことのできない方や小さなお子様は使用を控えてください。

【形状・構造及び原理等】


〈形状・構造〉(原材料)

本品の構成品と付属品は下記の通り。

内容	名称	数量
構成品	鼻用洗浄器	1セット
付属品	液晶温度シール	1枚
付属品	ノーズリフレ鼻洗浄剤	40包

状況に応じて、追加でロングチューブを1本付属する場合がある。

各部の名称と材質は下記の通り。

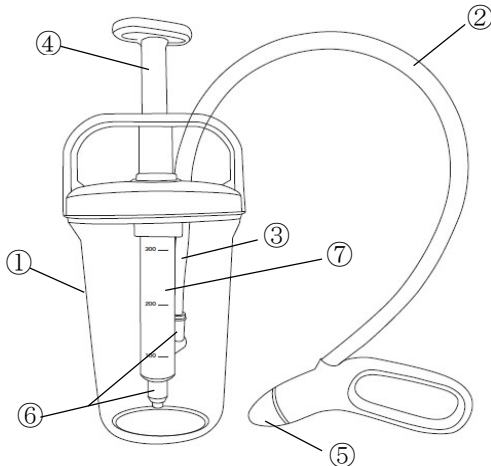

寸法：ボトル：直径約8.7cm×高さ11.6cm

No.	名称	材質
①	ボトル	PC
②	ロングチューブ	シリコン
③	ショートチューブ	シリコン
④	ピストンポンプ	ABS
⑤	ノズル	ABS
⑥	弁	ABS
⑦	パイプ	ABS

【原理】

ボトルに 300mL の水とノーズリフレ鼻洗浄剤 1 包（2.7g）を入れ溶けた洗浄液がノズル先端の穴より出る。鼻腔内の埃、雑菌等の除去の為の鼻用洗浄器である。

付属品：ノーズリフレ鼻洗浄剤

成分：塩化ナトリウム

使用方法：洗浄液の濃度を調節するために300mLの水に1包を入れて使用する。

【使用目的又は効果】

洗浄液を鼻腔に噴出によって、鼻腔内の埃等を除去し、鼻腔内の衛生を維持の目的とする。

【使用方法等】

1. 洗浄前の準備

- ①洗浄には、蒸留水・滅菌水、または一度沸騰させて冷ました清潔な水を使用する。
- ②約 40℃のぬるま湯をボトルの 300mL ラインまで注ぐ。
- ③液晶温度シールが「OK」を示し、水温が35℃～40℃の範囲内であることを確認してから、「ノーズリフレ鼻洗浄剤」1包を入れよく溶かす。
- ④ポンプをボトルに戻し、キャップを回してしっかり閉める。

2. 洗浄

- ①ノズルを鼻にあて、前に屈む。
鼻粘膜を傷つけるのでノズルを鼻の奥まで入れないこと。
- ②「アー」と声を出しながら、ピストンをゆっくり押して洗浄する。
- ③左右の鼻を 5 プッシュずつを目安に、交互に洗浄する。

3. 洗浄後

- ①鼻に残った洗浄液を出す。
- ②使用後は本体を洗浄する。

【使用上の注意】

- ①子供は保護者の指示のもとで使用する。
- ②鼻・耳の炎症、鼻づまりがひどい場合は、ご使用前に医師の指導を受けてください。
- ③本品を使用中に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ④使用後に鼻を強くかまないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光や高温高湿の場所を避けて保管する。

使用を再開する時は、本体をよく水洗いしてから使用すること。

〈耐用期間〉

耐用年数:3 年〔製品未使用時の場合、自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

- ①ノズル、ボトル、ポンプ部分を中性洗剤で洗い、水でよくすすぐこと。
- ②ボトルに約1/3量の水を入れ、ピストンを押して内部の洗浄液を洗い出し、水が出なくなるまで数回空押しすること。
- ③ポンプとボトルを分け、風通しのよい場所で十分に自然乾燥させること。

※詳しく使用方法及び保守方法等は取扱説明書を確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社
東京都新宿区矢来町 1 1 1
TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.
(中華人民共和国：China)