

類別：機械器具 21 内臓機能検査用器具

一般医療機器 再使用可能な心電用電極 42489000

Kenz 成人用胸部電極 CE－11


【禁忌・禁止】

- * MRI 検査を行なうときは、被検者に接続されている電極類を取り外してください。誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

外形寸法 41mm (W) × 26mm (D) × 26mm (H) ± 10%
重量 14g ± 10%

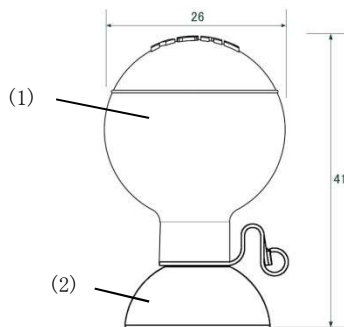

(1) ゴム球

(2) 電極 (銀-塩化銀)

【使用目的又は効果】

使用目的

体表に設置する導体をいう (通常ベルトで固定し、コンタクトゲルを使用する)。体表面の電気信号を処理装置 (心臓の電気活動をグラフで表示する) に伝達する。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計 (ECG) である。
本品は再使用可能である。

【使用方法等】

使用前に本品の電極部 (金属部分) の汚れを良く拭き取り、ECG クリーム等を塗り付けます。その後、被検者に装着します。

【使用上の注意】

1. 電極部に汚れのある場合は十分に洗浄又は拭き取りをしてください。
2. 手術中に、電気メスやその他の医療機器を併用する場合には、高周波電流等がこの電極部を通じて流れる場合があるため、手術部位からできるだけ離すようにしてください。
3. 電極部を他の金属と接触させないでください。
4. 金属部を紙やすりなどでこすらないでください。
5. 電極取り付け位置をアルコールで拭いてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光を避け涼しい場所で保管してください。
2. 有効期間
2 年 (当社データによる自己認証)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社スズケン
愛知県丹羽郡大口町外坪一丁目 58-1
TEL (0587) 96-2081 FAX (0587) 94-1105

<外国製造業者>

China QingDao Bright Medical Manufacturing Co., Ltd.
チャイナ チンタオ ブライト メディカル
マニュファクチャリング
(中華人民共和国)

* <お問い合わせ先>

株式会社スズケン
名古屋市東区東片端町 8 番地
TEL (052) 950-6325 FAX (052) 962-7440