

類別及び一般的名称：機械器具 (54) 医療用捲綿糸

一般的名称 捲綿糸

販売名 ルーツエー綿棒

【禁忌・禁止】


本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となりますので、絶対に行わないでください。

【形状・構造及び原理等】

(1) 原材料／真鍮ニッケルメッキ仕上げ

(2) 形状・構造

本製品の形状は以下のとおり。

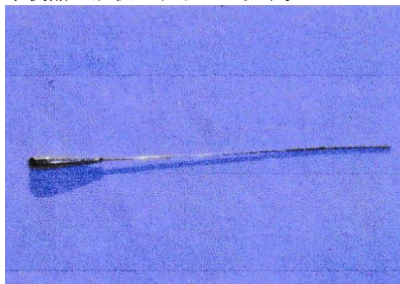

【組成】

黄銅製ニッケルメッキ仕上げ

【使用目的】

手術及び診療等の医療行為。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をして下さい。
- (2) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使しないで下さい。また、使用時に必要以上の力（応力）を加えると、曲がり、折損等の原因になるので御注意ください。
- (3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬してください。

使用禁忌

塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になります。出来るだけ使用を避けてください。使用中に付着したときには、水洗いしてください。

【貯蔵方法】

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をして下さい。
- (2) 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をしてください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために消毒をしてください。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用してください。
下すすぎ、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることをお勧めします。
- (3) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥してください。
- (4) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をしてください。
- (5) 点検後、セット、包装をし高圧蒸気滅菌をしてください。なお、セット、包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮してください。

使用禁忌

強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがありますから、使用しないで下さい。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を、汚物除去、洗浄時に用いると、器具の表面が損傷しますから使用しないで下さい。

【包装】

ビニール 50 本包装 2 袋で 1 箱 100 本入

製造販売業者及び製造業者 有限会社 スワメディカル

〒136-0071

東京都江東区亀戸 4 丁目 12-11

電話 03-3681-3784