

アキュラ バイオプシー システム

(SN****: セルジンガー スタイルニードル)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

組成

カニューレ: ステンレススチール
 スタイルレット: ステンレススチール

形状

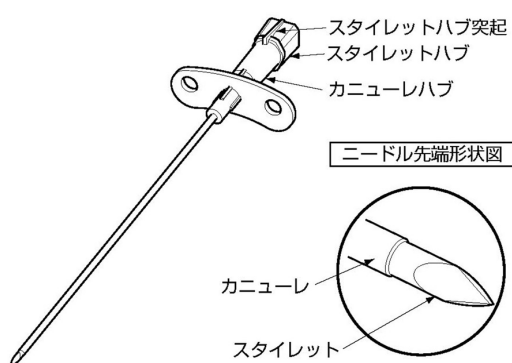

【使用目的又は効果】

生体組織検査用の採取針である。

注) 直接法動脈圧測定法、血液採取、経皮的カテーテル挿入及び頸動脈血管造影法等を施行する際に用いる改良型動脈用穿刺針である。

【使用方法等】

使用方法等

I. 準備

1. 本品の滅菌包装を開封し、無菌的に本品を取り出す。
2. 本品から、保護用シースを取り外す。

II. 穿刺

3. 動脈を触診後、ニードルを対象の動脈に対して斜め45°で穿刺し、貫通する。(スタイルレットハブの突起側を上に向け、ハブの頭を押さえながら穿刺すること。)
4. 貫通後、スタイルレットを引き抜く。
5. カニューレ先端を血管後壁より徐々に引き戻して、血管内中央に配置する。

III. 手技の終了

6. 穿刺部からカニューレを抜去する。
7. カニューレにスタイルレットを装填して、ニードル先端に保護用シースをかぶせ廃棄処分する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 開封前には必ず、滅菌包装に、破れ等の損傷又は水ぬれが無いことを確認する。
2. 本品から、保護用シースを取り外す際は、カニューレ及びスタイルレットの先端を傷つけたり、破損させないように慎重におこなうこと。
3. 本品の使用前には、適切な機能を妨げるような破損箇所、その他の欠陥が無いことを確認する。
4. 配置後、血液の凝固を防ぐため、ただちに次の手技を行うこと。

【使用上の注意】

使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

本品を、抗凝血療法中の患者や血友病の症状がある患者に対して使用する際には、厳密な専門的判断の上、適用すること。[止血が困難になるおそれがある。]

重要な基本的注意

肺への穿刺操作により空気塞栓を合併し、脳梗塞や心筋虚血に至る事例が報告されていることから、症状等が認められた場合には速やかに頭低位を保ち、CT等による診断を行い適切な処置を行うこと。なお、重篤な場合には速やかに高圧酸素治療を考慮すること。

有害事象

重大な有害事象

- ・出血
- ・血腫
- ・感染
- ・空気塞栓
- ・痛み等

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。

有効期間

製品ラベルに表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

スーガン株式会社
 TEL (06) 6354-6181

【製造業者】

アルゴンメディカルデバイス社
 (Argon Medical Devices, Inc.)、アメリカ

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

【発売元】



大阪市北区東天満 1-12-10 〒530-0044

<http://www.sheen-man.co.jp>

TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114