

**2021年11月2日 (第3版)

認証番号 20700BZY00365000

*2019年5月15日 (第2版)

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器	短期的使用胆管・膵管用カテーテル (JMDNコード: 10696012)
(管理医療機器)	短期的使用腎臓用カテーテル (JMDNコード: 10735002)
(管理医療機器)	短期使用尿管用チューブステント (JMDNコード: 34926022)
(管理医療機器)	滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル (JMDNコード: 70306000)
(管理医療機器)	胸部排液用チューブ (JMDNコード: 11308102)
(管理医療機器)	排液用チューブ (JMDNコード: 14191102)
** (一般医療機器)	カテーテルコネクタ (JMDNコード: 32339000)

ディスポーザブルドレナージカテーテルセット

** (アスピレーションフラッシュアダプタ／ユニバーサルフラッシュアダプタ／シリンジアダプタ)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法


- ・ニードルレスポートに針を挿入しないこと。[製品が破損する可能性がある。]
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


形状

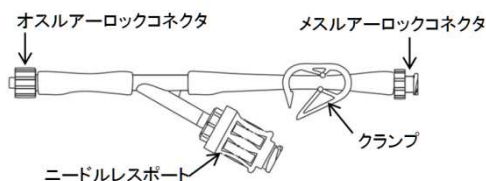■アスピレーションフラッシュアダプタ
＜ルアーロックタイプ (AFA-LL)＞


*＜ダブルクランプタイプ (DFA-LL)＞

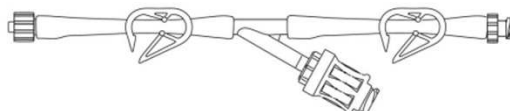

*＜ラージボアタイプ (AFA-LB)＞

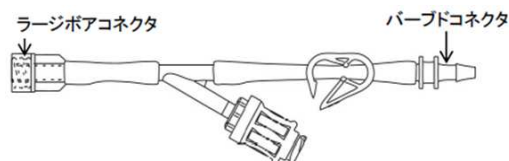

*＜ラージボアプラスタイプ (AFA-20P)＞

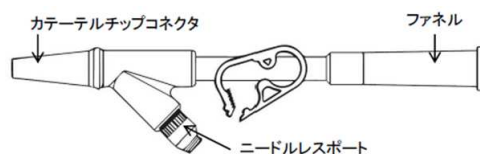


■ユニバーサルフラッシュアダプタ

*＜ルアーロックタイプ (UFA-LL)＞



**■シリンジアダプタ

＜ルアーロックタイプ＞

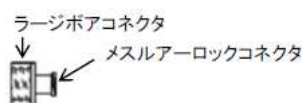

【使用目的又は効果】

本品は、以下の目的で挿入・留置されるドレナージカテーテル及びその付属品である。

- 1). 経皮経肝的に胆道又は膵管に挿入してドレナージを行う。
- 2). 経皮的に腎臓又は膀胱嚢を造設して腎、尿管又は膀胱に留置し、導尿、排液、又は尿路の確保等を目的に、体内に挿入する。
- 3). 体内に留置し、重力又は陰圧により、体内の液体又は気体を体外へ排出する。

各付属品は、ドレナージカテーテルの挿入・留置やドレナージする際に必要となり得るものであり、必要に応じてこれらを組み合わせることにより、手技が簡便かつ迅速に行える。

**＜アスピレーションフラッシュアダプタ／ユニバーサルフラッシュアダプタ／シリンジアダプタの使用目的又は効果＞

本品は、「ディスポーザブルドレナージカテーテルセット」の付属品であり、灌注又は排液用カテーテルを容器等の別の対象物に接続するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

*＜アスピレーションフラッシュアダプタ＞

1. オスルアーロックコネクタ、ラージボアコネクタ、もしくはカテーテルチップコネクタを、併用するカテーテルに接続する。
2. メスルアーロックコネクタ、バーブドコネクタ、もしくはファネルを、併用するドレナージバッグ等に接続する。
3. ニードルレスポートにシリンジのオスルアー（スリッパタイプ又はルアーロックタイプ）を押し込み、接続する。
4. 必要に応じてクランプを閉鎖し、吸引又は灌注を行う。完了後はクランプを開放し、必要に応じてシリンジを取り外す。
5. 再度接続する場合は上記3.から繰り返す。

**＜ユニバーサルフラッシュアダプタ／シリンジアダプタ＞

1. カテーテルチップコネクタもしくはラージボアコネクタを併用するカテーテルに接続する。
2. メスルアーロックコネクタを併用するドレナージバッグ等に接続する。
3. 吸引等を行う。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. ニードルレスポートにキャップはしないこと。シリンジが接続されていないときはニードルレスポート内のバルブが閉塞する。
- *2. ニードルレスポートにシリンジを接続する前に、ニードルレスポートの接続部を一般的なプロトコルに従い消毒すること。

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

本品の使用前には、適切な機能を妨げるような破損箇所、その他の欠陥が無いことを確認する。

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。

有効期間

製品ラベルに表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

スーガン株式会社


TEL (06) 6354-6181

〔製造業者〕

ユレシル社 (UreSil L.L.C.)、アメリカ

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

〔発売元〕

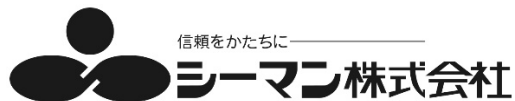

大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044

<https://www.sheen-man.co.jp>

TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114