

2017年11月20日（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号 27B1X00011C00005

2007年11月30日（第1版）

機械器具 48 注射筒

一般医療機器 汎用注射筒（JMDNコード：13929001）

CCS ディスポーザブルアンギオシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


使用方法

- ・再使用禁止。
- ・本品を脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤の投与時に使用しないこと。[本品が破損する可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

形状

本品は、容量、プランジャ、プランジャシャフト、先端チップ、シリンジ外筒先端及びグリップの形状の違いにより、種類が異なる。

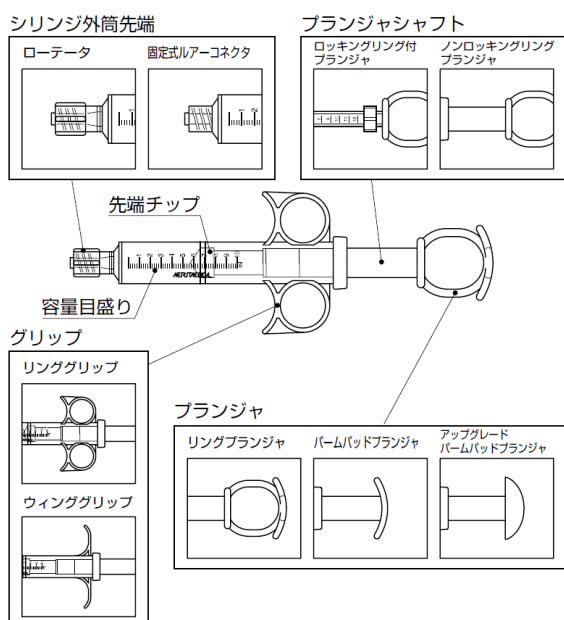

【使用目的又は効果】

本品は、液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。目盛り付の容器及びプランジャから成る。

※本品は、マニホールド又はカテーテル等と組み合わせて、血管内に造影剤等を注入するために用いるディスポーザブルアンギオシリンジである。


【使用方法等】

使用方法

1. 本品は滅菌済み製品であるので、開封前には必ず、滅菌包装に破れ、水ぬれ等が無いことを確認する。
2. 本品の滅菌包装を開封し、無菌的に本品を取り出す。
3. 本品のプランジャを完全に押し込む。
4. プランジャを引いて造影剤を吸引する。
5. 吸引後、シリンジ内の空気を除去する。
6. シリンジ外筒先端とマニホールド又はカテーテル等を接続し、プランジャを押して造影剤を注入する。

ロックリング：

ロックリング付のシリンジは、空気を除去した後、プランジャにある目盛り溝（凹）にロックリングのストッパー（凸）がぐっとはまりこむまで時計回りに回しロックする。もし、はまらない場合は使用しないこと。

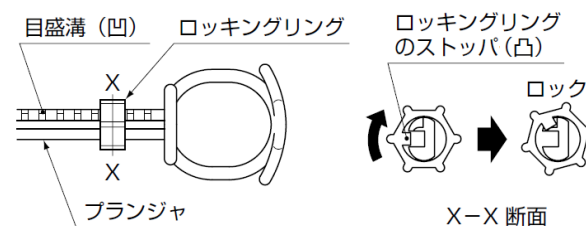

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 本品を用いて造影剤を注入する際は、空気がシリンジ内に混入していないことを確認する。万一、空気が混入している場合は、空気を完全に除去すること。
2. マニホールド又はカテーテル等と接続する場合は、確実に接続すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品の使用前には、適切な機能を妨げるような破損箇所、その他欠陥が無いことを確認する。

有害事象

重大な有害事象

- ・血栓又は塞栓の形成

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。

有効期間

製品ラベルに表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

スーガン株式会社

TEL (06) 6354-6181

【製造業者】

メリットメディカル社

(MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC.)、アメリカ

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

【発売元】



大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044

http://www.sheen-man.co.jp

TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114