

機械器具 48 注射筒

一般医療機器 汎用注射筒 (JMDN コード : 13929001)

シーマン ポリカーボネートシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

組成

外筒、筒先：ポリカーボネート
ガスケット：エラストマー
潤滑剤：シリコン油

形状

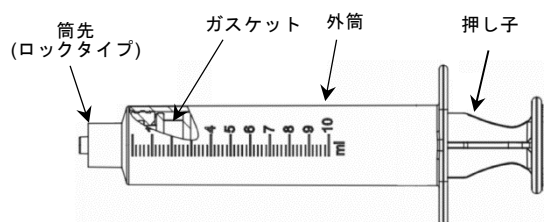

【使用目的又は効果】

本品は、液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。

【使用方法等】

使用方法

1. 包装を開封し、包装から本品を取り出す。
2. 薬液注入等を行う。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 本品に衝撃を与えないこと。〔破損するおそれがある。〕
2. 他の医療機器と接続する場合は、以下の事項を順守すること。
 - 1) 接続する際は、過度な締め付けをしないこと。〔筒先に破損、空回りが生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こすおそれがある。〕
 - 2) 接続部分に薬液又は血液を付着させないこと。〔接続部の緩み、空回り等が生じ、液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
 - 3) コネクタ等と接続する際は、横方向の力を加えないこと。〔筒先に曲がりや破損が生じ、液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
3. あらかじめ他の医療機器等との接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。
4. 押し子はまっすぐに引くこと。〔斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気の混入又はガスケットが外れるおそれがある。〕
5. 押し子を引く際は、ガスケットが外筒印刷部の目盛を越えないこと。〔押し子が外筒から抜けて液漏れや空気混入のおそれがある。〕

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品はポリカーボネートを使用している。脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を使用する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れについて注意すること。〔薬液によりひび割れが生じ、薬液漏れ及び空気混入等のおそれがある。〕
2. シリンジポンプを使用する場合は、シリンジポンプのメーカーに適用の可否を確認すること。
3. 使用中は本品の破損、接続部の緩みや外れ、空気混入、液漏れ等について、定期的に確認すること。
4. 医薬品の種類によっては、本品の外筒の内側に塗布されているシリコン油が析出することがあるので注意すること。シリコン油が析出した場合は、適切な処置をとること。
5. 外筒印刷部をこすらないこと。また、印刷部に薬液がついた状態で放置しないこと。〔目盛が消えるおそれがある。〕
6. 造影剤等の高圧注入には使用しないこと。〔液漏れ又は破損する可能性がある。〕
7. 冷えた薬液を吸引し使用する場合は、取り扱いに注意すること。〔低温下では耐衝撃強度が低下し、破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。

有効期間

製品ラベルに表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

スーガン株式会社
TEL (06) 6354-6181

【製造業者】

シャンハイ カインドリー メディカル インストゥルメンツ カンパニー リミテッド (Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.)、中国

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

【発売元】



大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044
http://www.sheen-man.co.jp
TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114