


ピンセット(コーラー)

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

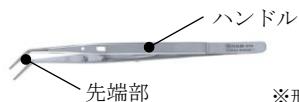

※形状は代表例

型番	全体	先端形状	全長 (cm)
4077			13
4085			16
4095			16
4103			15
4144			12
4146			12
4148			15
4149			15
4150			15
4342			12
5069			12
5160			16
5241			16
5603			8.5
5666			16
5873			12
5916			—
6050			15
6141			12
6978			16.5

7681			17.5
7682			17.5
7687			15
7688			15
7689			17.5
7690			17.5

2) 原材料：ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、2つの先細のパネ性先端部をもち、この先端部を近接させて(閉じて)、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する歯科手術器具である。

【使用方法等】

＜使用前の準備＞

- 1) 本品は洗浄・滅菌後に使用すること。
- 2) 先端部に傷や割れ等が無いことを確認する。

＜使用中の操作＞

- 1) ハンドルを操作し、2つの先端部を閉じるにより使用する。

＜使用後の処置＞

- 1) 使用後は直ちに40℃以下の水で洗浄を行う。
- 2) 滅菌方法はオートクレーブ滅菌を推奨する。滅菌は、滅菌機器の取扱説明書の指示に従って行うこと。
- 3) 滅菌後は10分以上乾燥させること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 粗雑な取扱いは本品の寿命を著しく低下させるので注意すること。
- 2) 破損、曲がり等の原因となり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄・消毒・滅菌方法＞

- 1) 使用後は 40℃以下の水と市販の洗浄剤を用いて洗浄及び消毒を行うこと。濃度及び浸漬時間は消毒液の取り扱い説明書に従うこと。
- 2) すすぎは蒸留水を用いて行うこと。
- 3) 分解が可能な器具は分解して洗浄すること。なお、保管時は組み立てて保管すること。
- 4) 滅菌後は室温まで放冷すること。

推奨滅菌条件
温度：132～137℃ 時間：4 分以上

＜使用者による保守点検事項＞

- 1) 使用前・使用後に、ヒビ、キズがないか、又作業部・柄部に大きなキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG
国名：ドイツ