

サイレンサーSL

再使用禁止(ゲージのみ)


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
ゲージは単回使用の医療機器であり、再使用禁止である。
- ・次の患者には適用しないこと
炎症を起こしている患者
顎関節の痛みがある患者
動揺歯の状態がひどい患者
顎あたりの残存歯が8本以下の患者
下顎前突(クラス3)の患者
BMI値が30以上の患者

【形状、構造及び原理等】

■構成品

ゲージ

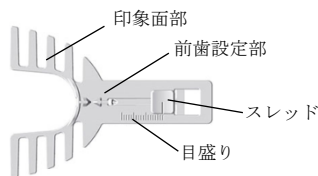


■付属品

コネクタ



メジャープレート、アンカー、ドリリングシエル、
ホールディングピン

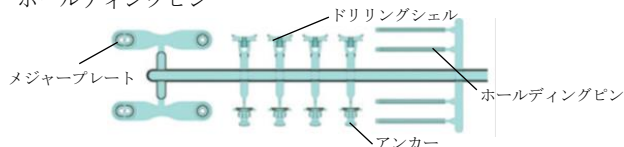

原材料：ポリアミド

【使用目的又は効果】

本品は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する材料である。

【使用方法等】

- 1) 患者の口腔内に本品を挿入し、前歯設定部に前歯の位置を合わせて印象面部をかみ合わせ、スレッドの位置を決定する。
- 2) 下顎を前方移動した状態でスレッドの位置を決定する。
- 3) 下顎を目標とする位置にあわせ、スレッドの位置を決定する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品に用いられた原材料成分又は類似成分のものに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 3) 使用方法、注意事項を患者に説明し、不具合が生じた場合はた

だちに調整もしくは製作しなおすこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＜使用期限＞

- 1) 本品は、包装に記載の※使用期限までに使用すること。[記載の使用期限は製造元データによる。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

ERKODENT Erich Kopp GmbH
国名：ドイツ